

# Orthopädische Produkte 2024 Orthoservice Deutschland GmbH



**ORTHO SERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better

“

Wenn das Zusammentreffen ein erfreuliches und glückliches Ereignis war, so ist das Gründen und Leiten einer Gruppe ein Konzept, das wir jeden Tag mit Vertrauen, Ausdauer und Kompetenz voranbringen. ”

*Pamela Pirovano und Paolo Rossi*  
Inhaber Orthoservice AG



Um mehr über uns und unsere Geschichte zu erfahren, scannen Sie den QR-Code



# Inhalt

## ORTHESEN

### HALS..... 9

- Halskrause, halbstarr ..... 10
- Halskrause, starr ..... 11

### RÜCKEN ..... 13

- Aufrichter für die Schulter ..... 14
- Elastische Orthese..... 15
- Halbstarre orthopädische Korsetts ..... 20
- Starre Orthesen für den Brust- und Lendenwirbelbereich ..... 31
- Hyperextensionsorthese ..... 33

### SCHULTER ..... 35

- Schulter Funktionsbandage..... 36
- Claviculabandage..... 37
- Immobilisator für das Schultergelenk ..... 38
- Immobilisator für Abduktion 0° und Innenrotation..... 39
- Immobilisator für Abduktion 10° bis 20° ..... 43
- Extra Rotations-Immobilisator ..... 46

### ELLENBOGEN ..... 49

- Ellbogenorthese elastisch..... 50
- Ellbogenorthese..... 51

### HAND/UNTERARM ..... 53

- Epicondylitis-Spange..... 54
- Elastische Handgelenkbandage ..... 55
- Immobilisierung des Handgelenks.. 56

### FINGER ..... 61

- Immobilisierung des Daumens ..... 62
- Immobilisierung des Finger ..... 63

### HÜFTE/OBERSCHENKEL ..... 65

- Hüftorthese ..... 66
- Orthesen für die Hüfte ..... 67

### KNIE..... 71

- Kniestütze..... 72
- Knieorthese mit Gelenkstäben..... 73
- Knieschützer zur Patellastabilisierung ..... 78
- Knie Ruhigstellungsschiene..... 79
- Orthesen postoperative ..... 81
- Funktionale Knieorthese..... 82
- Orthese für Kniegelenksarthrose... 86

### UNTERSCHENKEL/

### SPRUNGGELENK..... 89

- Knöchelbandage ..... 90
- Knöchelbandage mit Gurten..... 91
- Sprunggelenkorthese mit zwei Stützschaalen ..... 92
- Lagerungsschiene für die Nacht.... 94
- Peroneusorthese..... 95
- Gehschiene als Stiefel..... 99
- R.o.m.Walker..... 103

### ORTHO 14 -

### PRODUKTE FÜR KINDER..... 105

- Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen..... 117

**HALS**




Seite 9    **cervistrong**    **cervistable**

**RÜCKEN**






Seite 13    **dorsolite**    **litecross90**    **litecross91**    **litecross93**











**lumbofit70**    **lumbofit72**    **dorsopull 74**    **NEU lumboFAST**    **NEU lumboFAST forte**    **lumbopull 70**    **lumbopull 72**    **lumbopull 70 forte**    **lumbopull 72 forte**









**lumbosafe regular**    **lumbosafe extra**    **lumbosafe chairback**    **spinalplus2.0**    **spinalplus**    **e-STAB**    **nhyco**

**SCHULTER**










Seite 37    **shouldercross**    **octofix (cvb)**    **acromion 2.0**    **shouldfix open**    **shouldfix light**    **shouldfix 3**    **sling-up 2.0**    **top 4-S**






**top II-S 10°**    **top II-S 10°/15°**    **extra-S 15°**    **extra-S 30°**

**ELLENBOGEN**




Seite 51    **epilastik 32**    **elbo PRO**

**HAND UNTERARM**









Seite 55    **NEU epiFEEL**    **manulastik 19**    **manulite**    **polFIT 19**    **polFIT 21**    **polFIT 22**    **polFIT 17**

**FINGER**




Seite 63    **daumfix**    **stax**

**HÜFTE  
OBERSCHENKEL**

Seite 67



symplus



hipocross 2.0 SET



hipo



kafo



kinesio  
standard



kinesio  
long

**KNIE**

Seite 73



genuLASTIK 04



genuFIT 15A



genuSKILL 28A



genuFIT 15



genuFIT 27A



genuFIT 50A



genuFIT 16



immok  
0°/20°

**NEU**

go up PRO



pluspoint  
FAST



pluspoint 4



pluspoint 3



pluspoint 3  
short



genufeel OA



ORTHO-A

**UNTERSCHENKEL  
SPRÜNGGELENK**

Seite 93



malleoLASTIK 37



malleorAPID



malleostrong  
PRO



airstrong



malleonite



carbonafo  
VENTRAL



carbon afo



afo light



afo  
extrastrong



airstep walker



airstep walker  
short



airstep tight  
walker



airstep tight  
walker short



r.o.m.  
walker

**ORTHO 14**

Produkte für Kinder

Seite 109



ORTHO 14  
100



ORTHO 14  
105



ORTHO 14  
305



ORTHO 14  
310



ORTHO 14  
315



ORTHO 14  
500



ORTHO 14  
502



ORTHO 14  
702/3



ORTHO 14  
800



ORTHO 14  
805



ORTHO 14  
810

# Ein einzigartiges Unternehmen mit zahlreichen Produktions- und Vertriebsstandorten



**ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH**  
Baden-Baden, Deutschland

**ORTHOSERVICE AG**  
Chiasso, Schweiz

**RO+TEN S.r.l.**  
Verano Brianza, Italien

**ORTOVENETA S.r.l.**  
Maser, Italien

**ICS ORTHOSERVICE S.r.l.**  
Balti, Moldawien

**ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.**  
Częstochowa, Polen

## Orthoservice Ro+Ten in Zahlen

- 130 Mitarbeiter in der Orthoservice-Gruppe
- 9 Angemeldete Patente
- Export in mehr als 20 Länder



**RO+TEN S.r.l.**  
1978 - Verano Brianza, Italien



**ORTHOSERVICE AG**  
1996 - Chiasso, Schweiz



**ORTOVENETA S.r.l.**  
2007 - Maser, Italien



**ICS ORTHOSERVICE S.r.l.**  
2010 - Balti, Moldawien



**ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH**  
2011 - Baden-Baden, Deutschland



**OSUK Ltd**  
2024 - Sunderland, UK



**ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.**  
2021 - Częstochowa, Polen





# Orthesen

# Das Bestellportal Fachhandel, nur für Sie.

## Loggen Sie sich ein und Sie erhalten:

- exklusive Dienstleistungen
- Ihre personalisierte Preisliste
- die Möglichkeit, Bestellungen online aufzugeben

**Falls Sie bereits registriert sind**, loggen Sie sich bitte mit Ihren Anmeldedaten ein

**Falls Sie noch nicht registriert sind**, klicken Sie bitte auf „Registrieren“ und geben Ihre Daten ein

**Bestätigen Sie Ihre Registrierung** in der E-Mail, die Sie erhalten werden

**Entdecken Sie die für Sie konzipierten Dienstleistungen**  
Besondere Angebote  
Materialien für Ihre Filiale  
Spezielle, exklusive Dienstleistungen

**Wählen Sie Ihre Produkte, legen Sie sie in den Warenkorb und schließen Sie Ihre Bestellung ab**

**Sie erhalten eine E-Mail** mit der Eingangsbestätigung Ihrer Bestellung



Scannen Sie den QR-Code und Sie erhalten Zugang zum Bestellportal Fachhandel

[www.orthoservice.com](http://www.orthoservice.com)

**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better



ORTHOSERVICE  
RD+TEN  
*Take care feel better*

ORTHOSERVICE  
RD+TEN  
*Take care feel better*

Das Problem  
verstehen  
Lösung  
So entstehen

HALS



## cervistrong



Notfallprodukt

### Zervikalstütze mit Verstärkung

HMV-Nr.: 23.12.03.1031

#### INDIKATIONEN

- Leichte bis mässige Zerrungen der Halswirbelsäule (Schleudertrauma)
- Schwindelanfälle zervikalen Ursprungs
- Zervikale Arthrose
- Mässige Bandscheibenleiden mit zervikaler Brachialgie

#### EIGENSCHAFTEN

- Halbstarre Struktur aus Schaumstoff, mit interner Verstärkung aus Polyethylen
- Überzug aus Baumwoll-Jersey
- Klettverschluss an der Rückseite
- Komplett waschbar
- Transparent im Röntgenbild
- Anatomische Form



|                      |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Artikelnummer</b> | <b>M.20304</b>  |                 |                 |                 |
| <b>Größen</b>        | <b>S</b>        | <b>M</b>        | <b>L</b>        | <b>XL</b>       |
| <b>Halsumfang cm</b> | 30/35           | 36/41           | 42/47           | 48/53           |
| <b>Höhe in cm</b>    | 6 - 8 - 10 - 12 | 6 - 8 - 10 - 12 | 6 - 8 - 10 - 12 | 6 - 8 - 10 - 12 |
| <b>Farbe</b>         | grau            |                 |                 |                 |



# cervistable

## Zweischalige HWS-Schiene mit Tracheaöffnung

### INDIKATIONEN

- Mittelschwere bis schwere Distorsionen der Halswirbelsäule (Schleudertrauma)
- Multiple Zervikaldiskopathie
- HWS-Traumata
- Pathologische Dislokation durch Metastasen im Zervikalbereich
- Unterstützung des postoperativen Verlaufs in der Wirbelsäulenchirurgie

### EIGENSCHAFTEN

- 2-Schalen Grundkörper mit Klettverschluss
- Grundkörper aus nicht zytotoxischem Schaumstoff gemäß UNI EN ISO 10993-5
- Zentrale, starre Stützplatten für Kinn und Hinterkopf
- Röntgendurchlässig und wasserabweisend
- Perfekt angepasst an die Anatomie von Kinn, Hinterkopf und Schulter
- Trachea-Aussparung und Öffnungen zur Luftzirkulation
- Vorgerüstet für die Befestigung der Hyperextensionsorthese



|                             |                |          |          |       |
|-----------------------------|----------------|----------|----------|-------|
| <b>Artikelnummer</b>        | <b>M.1530T</b> |          |          |       |
| <b>Größen</b>               | <b>S</b>       | <b>M</b> | <b>L</b> |       |
| <b>Halsumfang cm</b>        | 30/35          | 35/40    | 40/45    |       |
| <b>Höhe Hals*<br/>in cm</b> | 6 cm           | 8 cm     | 11 cm    | 13 cm |
| <b>Farbe</b>                | beige          |          |          |       |

\* vertikaler Abstand zwischen Schulteroberseite und Kinn

**OPTION: M.P35/10 Connect**, Verbindungsplatte für Zervikalstütze Cervistable und Hyperextensions-Orthesen e-STAB





RÜCKEN



## dorsolite

### Geradehalter für den Rücken

HMV-Nr.: 23.13.01.0011

#### INDIKATIONEN

- Für die Korrektur von Rundrücken, Kyphose und Scapula Alata
- Als Unterstützung bei der Behandlung von haltungsbedingten Rückenschmerzen

#### EIGENSCHAFTEN

- Struktur und Schulterpolster aus PE-Schaumstoff mit Beschichtung aus Samt und Funktionsgewebe
- Umlenkensystem in der Mitte hinten für besseren Zug beim Schließen
- Verstellbare Riemen mit Y-Klettband
- One-Size Prinzip: Justierung der Gesamtlänge wie auch der Schulterpolster möglich
- Obere Umlenkringe mit Gummifixierung für die optimale Anpassung an den Körperbau des Patienten
- Verschluss mit Klickschnallen
- Leicht zu tragen, wie ein Rucksack



|               |           |
|---------------|-----------|
| Artikelnummer | M.91111   |
| Einheitsgröße | universal |
| Höhe cm       | 30        |
| Farbe         | creme     |



# litecross90

**Schlanke, elastische Orthese zum Stabilisieren der Lendenwirbelsäule, mit formstabiler, thermoverformbarer Pelotte**

HMV-Nr.: **23.14.03.3062**

## INDIKATIONEN

- Lumbalgie
- Lumboischialgie und Lumbocruralgie
- Spondylarthrose und lumbale Diskopathien
- Leichtes Trauma der lumbosakralen Wirbelsäule und paravertebrale lumbale Muskelkontraktur
- Postoperative Behandlung
- Individuell anpassbar an die Pathologie des Patienten

## EIGENSCHAFTEN

- Elastische Spannbänder, die einen variablen und individuell einstellbaren Stützungsgrad erlauben
- Klettverschluss auf der Vorderseite
- Der Bauchbereich ist durch querliegende Spiralstäbe verstärkt
- 2 formstabile Pelotten, anterior und posterior, thermoverformbar, auf ärztliche Verschreibung
- Starre Schienen optional, können nach ärztlicher Verschreibung angeformt werden. Sie können in die dafür vorgesehenen Taschen eingeschoben werden



Grundkörper aus exklusivem Sensitive® Gewebe, elastisch und atmungsaktiv



### Artikelnummer

**M.1090C · M.1090S**

### Größen

| XS    | S     | M      | L       | XL      | XXL     |
|-------|-------|--------|---------|---------|---------|
| 70/80 | 80/90 | 90/100 | 100/110 | 110/120 | 120/130 |
| 19    | 19    | 19     | 19      | 19      | 19      |
| 28    | 28    | 28     | 28      | 28      | 28      |

### Beckenumfang in cm

### Höhe vorne cm

### Höhe hinten cm

### Farbe

M.1090C = creme · M.1090S = schwarz

**OPTION:** 9ST012/L starre Stäbe optional 22 cm



# litemcross91

**Breite, elastische Orthese zum Stabilisieren der Lendenwirbelsäule, mit formstabiler, thermoverformbarer Pelotte**

HMV-Nr.: 23.14.03.3061

## INDIKATIONEN

- Lumbalgie
- Lumboischialgie und Lumbocruralgie
- Spondylarthrose und lumbale Diskopathien
- Leichtes Trauma der lumbosakralen Wirbelsäule und paravertebrale lumbale Muskelkontraktur
- Postoperative Behandlung
- Folgebeschwerden von Sinterungen der Lendenwirbelsäule
- Behandlung von Brüchen der Querfortsätze
- Individuell anpassbar an die Pathologie des Patienten



## EIGENSCHAFTEN

- Grundkörper aus exklusivem Sensitive® Gewebe, elastisch, atmungsaktiv, maschenfest und antistatisch
- Elastische Spannbänder, die einen variablen und individuell einstellbaren Stützungsgrad erlauben
- Der Bauchbereich ist durch querliegende Spiralstäbe verstärkt
- 2 formstabile Pelotten, anterior und posterior, thermoverformbar, auf ärztliche Verschreibung
- Starre Schienen optional, können nach ärztlicher Verschreibung angeformt werden. Sie können in die dafür vorgesehenen Taschen eingeschoben werden

### Artikelnummer

M.1091C · M.1091S

### Größen

| XS | S | M | L | XL | XXL |
|----|---|---|---|----|-----|
|----|---|---|---|----|-----|

### Beckenumfang in cm

|       |       |        |         |         |         |
|-------|-------|--------|---------|---------|---------|
| 70/80 | 80/90 | 90/100 | 100/110 | 110/120 | 120/130 |
|-------|-------|--------|---------|---------|---------|

### Höhe vorne cm

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|----|----|----|----|----|----|

### Höhe hinten cm

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
|----|----|----|----|----|----|

### Farbe

M.1091C = creme · M.1091S = schwarz

**OPTION:** 9ST012/L starre Stäbe optional 26 cm



Möchten Sie immer über die neuesten Nachrichten aus der Welt von Orthoservice Ro+Ten informiert werden?

Rahmen Sie den QR-Code ein und besuchen Sie den News-Bereich





# litecross93

**Kurze, elastische Orthese zum Stabilisieren der Lendenwirbelsäule, mit formstabiler, thermoverformbarer Pelotte**

HMV-Nr.: **23.14.03.3076**

### INDIKATIONEN

- Lumbalgie
- Lumboischialgie und Lumbocruralgie
- Spondylarthrose und lumbale Diskopathien
- Leichtes Trauma der lumbosakralen Wirbelsäule und paravertebrale lumbale Muskelkontraktur
- Postoperative Behandlung
- Individuell anpassbar an die Pathologie des Patienten

### EIGENSCHAFTEN

- Elastische Spannbänder, die einen variablen und individuell einstellbaren Stützungsgrad erlauben
- Der Bauchbereich ist durch querliegende Spiralstäbe verstärkt
- 2 formstabile Pelotten, anterior und posterior, thermoverformbar, auf ärztliche Verschreibung
- Starre Schienen optional, können nach ärztlicher Verschreibung angefordert werden. Sie können in die dafür vorgesehenen Taschen eingeschoben werden



Grundkörper aus Sensitive Gewebe, elastisch, atmungsaktiv, maschenfest und antistatisch



| Artikelnummer      | M.1093C - M.1093S                   |       |        |         |         |         |                    |
|--------------------|-------------------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|--------------------|
| Größen             | XS                                  | S     | M      | L       | XL      | XXL     | XXXL (nur schwarz) |
| Beckenumfang in cm | 70/80                               | 80/90 | 90/100 | 100/110 | 110/120 | 120/130 | 130/140            |
| Höhe vorne cm      | 14                                  | 14    | 14     | 14      | 14      | 14      | 14                 |
| Höhe hinten cm     | 23                                  | 23    | 23     | 23      | 23      | 23      | 23                 |
| Farbe              | M.1093C = creme · M.1093S = schwarz |       |        |         |         |         |                    |

**OPTION:** 9ST012/L starre Stäbe optional 16 cm



# lumboFIT70

Schmale, elastische Orthese zum Stabilisieren der Lendenwirbelsäule, mit formstabiler, thermoverformbarer Pelotte

HMV-Nr.: 23.14.03.3067

## INDIKATIONEN

- Lumbalgie
- Lumboischialgie und Lumbocruralgie
- Spondylarthrose und lumbale Diskopathien
- Leichtes Trauma der lumbosakralen Wirbelsäule und paravertebrale lumbale Muskelkontraktur
- Postoperative Behandlung
- Individuell anpassbar an die Pathologie des Patienten



Rückseitiger Teil aus atmungsaktivem Aer-OS Gewebe: hautfreundlich

## EIGENSCHAFTEN

- Separate, großflächige Zugbänder wirken stützend und sind variabel und individuell einstellbar
- Material im vorderen und seitlichen Bereich aus Viskose-Spinnfaser und Elastomer
- Der Bauchbereich ist durch querliegende Spiralstäbe verstärkt
- 2 formstabile Pelotten, anterior und posterior, thermoverformbar, auf ärztliche Verschreibung
- Starre Schienen optional, können nach ärztlicher Verschreibung angeformt werden. Sie können in die dafür vorgesehenen Taschen eingeschoben werden



### Artikelnummer

**M.T1170**

### Größen

**XS**

**S**

**M**

**L**

**XL**

**XXL**

### Taillenumfang cm

50/60

60/75

75/90

90/105

105/120

120/135

### Höhe vorne cm

20

20

20

20

20

20

### Höhe hinten cm

26

26

26

26

26

26

### Farbe

schwarz

**OPTION:** 9ST012/L starre Stäbe optional 22 cm



# lumboFIT72

**Breite, elastische Orthese zum Stabilisieren der Lendenwirbelsäule, mit formstabiler, thermoverformbarer Pelotte**

HMV-Nr.: **23.14.03.3067**

## INDIKATIONEN

- Lumbalgie
- Lumboischialgie und Lumbocruralgie
- Spondylarthrose und lumbale Diskopathien
- Leichtes Trauma der lumbosakralen Wirbelsäule und paravertebrale lumbale Muskelkontraktur
- Postoperative Behandlung
- Folgebeschwerden von Sinterungen der Lendenwirbelsäule
- Behandlung von Brüchen der Querfortsätze
- Individuell anpassbar an die Pathologie des Patienten

## EIGENSCHAFTEN

- Separate, großflächige Zugbänder wirken stützend und sind variabel und individuell einstellbar
- Material im vorderen und seitlichen Bereich aus Viskose-Spinnfaser und Elastomer
- Der Bauchbereich ist durch querliegende Spiralstäbe verstärkt
- 2 formstabile Pelotten, anterior und posterior, thermoverformbar, auf ärztliche Verschreibung
- Starre Schienen optional, können nach ärztlicher Verschreibung angeformt werden. Sie können in die dafür vorgesehenen Taschen eingeschoben werden



Rückseitiger Teil aus atmungsaktivem Aer-OS Gewebe: hautfreundlich



Artikelnummer

M.T1172

Größen

XS

S

M

L

XL

XXL

Taillenumfang cm

50/60

60/75

75/90

90/105

105/120

120/135

Höhe vorne cm

22

22

22

22

22

22

Höhe hinten cm

32

32

32

32

32

32

Farbe

schwarz

OPTION: 9ST012/L starre Stäbe optional 26 cm



Folgen Sie uns auf den sozialen Medien:



Teilen Sie unsere Beiträge, folgen Sie unseren Seiten, geben Sie uns ein 'Gefällt mir'



## dorsopull74

### Rückenmodul für Lumbopull 70 und 72

HMV-Nr.: 23.15.02.1003

#### INDIKATIONEN

- Dorsalgie aufgrund von Arthrose oder Kyphose
- Folgebeschwerden von Brüchen im oberen Rückenwirbel- und/oder Lendenwirbelbereich
- Folgebeschwerden von Rückenwirbelsinterungen aufgrund von Osteoporose oder Metastasen

#### EIGENSCHAFTEN

- Wird mit dem Korsett verbunden, um so zusammen mit dem Korsett ein Schultergurtkorsett zu erhalten
- Selbstanformende Dorsalstäbe, in Lieferung enthalten
- Es besteht optional die Möglichkeit, einen anformbaren, formstabilen Innenrahmen aus Aluminiumlegierung einzusetzen
- Rückseitig über Kreuz geführte Schultergurte, längenverstellbar, mit in ihrer Position voreinstellbaren Polstermanschetten
- Zweifach verbundene Polsterung aus PE-Schaumstoff



Artikelnummer

M.90074

Größen

XS

S

M

L

Abstand T1-L5 cm

35/41

41/47

47/54

54/61

Colore

weiß



NEU



# lumboFAST

**Orthese zur Überbrückung und Mobilisierung der Lendenwirbelsäule, mit formstabiler, thermoverformbarer Pelotte und seitlichen Schalen**

HMV-Nr.: 23.14.04.1020

### INDIKATIONEN

- Lumbalgie (wie z.B. nach Bandscheibenvorfall oder Bandscheibenprolaps)
- Lumboischialgie und Lumbokruralgie
- Spondylarthrose und lumbale Diskopathien
- Leichtes Trauma der lumbosakralen Wirbelsäule und paravertebrale lumbale Muskelkontraktur
- Postoperative Behandlung
- Folgebeschwerden von Sinterungen der Lendenwirbelsäule
- Behandlung von Brüchen der Querfortsätze

### EIGENSCHAFTEN

- Gebondetes Grundgewebe (dreidimensionales Netz innen und technisches Gewebe mit exklusivem Print außen): fest und formstabil für maximalen Halt, atmungsaktiv für maximalen Komfort
- System aus Seil und Umlenkrolle für eine optimale Stabilisierung und maximale Zugkraft bei minimalem Kraftaufwand
- Zugseile mit anatomisch geformten und leicht zu greifenden Endstücken
- Nur zwei Größen: das System zum Anpassen auf der Rückseite ermöglicht das Zuschneiden auf die entsprechende Größe
- Thermoformbare, feste Lendenpelotte mit Druckknöpfen angebracht: garantiert Stabilität für die Wirbelsäule und schützt vor dem Kontakt mit den Zugseilen
- Verstärkung aus Polypropylen zum Schutz des Seils
- Thermoverformbare Pelotten vorn zum Einstecken in die entsprechenden Taschen an der Orthese
- Thermoformbares Schalen-Kit (für die Seiten)



Wirbelsäulenabschnitt  
L2-L5

Art.-Nummer

REF.23070

Größen

1

2

Umfang Becken cm

70-106

106-145

Höhe vorne cm

16

16

Höhe hinten cm

24

24

Farbe

grau mit Hexagondesign



# lumboFAST forte

**Orthese zur Entlastung durch Überbrückung der Lendenwirbelsäule, mit formstabiler, thermoverformbarer Pelotte und seitlichen Schalen**

HMV-Nr.: 23.14.02.1020

## INDIKATIONEN

- Lumbalgie (wie z.B. nach Bandscheibenvorfall oder Bandscheibenprolaps)
- Lumboischialgie und Lumbocruralgie
- Spondylarthrose und lumbale Diskopathien
- Leichtes Trauma der lumbosakralen Wirbelsäule und paravertebrale lumbale Muskelkontraktur
- Postoperative Behandlung
- Folgebeschwerden von Sinterungen der Lendenwirbelsäule
- Behandlung von Frakturen der Querfortsätze
- Degenerative lumbare Skoliose
- Spondylose mit oder ohne Lysis der Wirbelsäule



## EIGENSCHAFTEN

- Gebondetes Grundgewebe (dreidimensionales Netz innen und technisches Gewebe mit exklusivem Print außen): fest und formstabil für maximalen Halt, atmungsaktiv für maximalen Komfort
- System aus Seil und Umlenkrolle für eine optimale Stabilisierung und maximale Zugkraft bei minimalem Kraftaufwand
- Zugseile mit anatomisch geformten und leicht zu greifenden Endstücken
- Nur zwei Größen: das System zum Anpassen auf der Rückseite ermöglicht das Zuschneiden auf die entsprechende Größe
- Thermoformbare, feste Lendenpelotte mit Druckknöpfen angebracht: garantiert Stabilität für die Wirbelsäule und schützt vor dem Kontakt mit den Zugseilen
- Verstärkung aus Polypropylen zum Schutz des Seils
- Thermoverformbare Pelotten vorn zum Einstecken in die entsprechenden Taschen an der Orthese
- Thermoformbares Schalen-Kit (für die Seiten)



Wirbelsäulenabschnitt  
L1-L5

Art.-Nummer

REF.23070

Größen

1

2

Umfang Becken cm

70-106

106-145

Höhe vorne cm

16

16

Höhe hinten cm

24

24

Farbe

grau mit Hexagondesign



# Lumbopull70

## Lendenwirbelsäulen-Orthese zur Mobilisierung

HMV-Nr.: 23.14.02.0015

### INDIKATIONEN

- Lumbalgie
- Lumboischialgie und Lumbocruralgie
- Spondylarthrose und lumbale Diskopathien
- Leichtes Trauma der lumbosakralen Wirbelsäule und paravertebrale lumbale Muskelkontraktur
- Postoperative Behandlung
- Folgebeschwerden von Sinterungen der Lendenwirbelsäule
- Behandlung von Brüchen der Querfortsätze
- Spodylose mit oder ohne Lysis der Wirbelsäule

### EIGENSCHAFTEN

- Verbundenes Sandwichgewebe (innen 3D Gewebe und außen Spezialgewebe): hohe Festigkeit, um eine größtmögliche Stabilisierung zu garantieren; Atmungsaktiv für einen größtmöglichen Tragekomfort
- System von in Reihe gelegten Flaschenzügen und Spanngurten (exklusiv), um eine optimale Stabilisierung, Spannung und Anpassung an die Anatomie bei minimalem Kräfteinsatz zu erreichen
- Elastischer rückseitiger Einsatz (nicht strukturell), um den Kontakt des Rückens mit den Gurten zu verhindern und für das Anbringen der verschiedenen Optionen per Klett
- Schmale rückseitige Gurte, mit einer Gurtbreite von 2,5 cm
- Vordere Pelotte mit Verstärkung im Inneren verschweißt mit Eingriff für einen leichteren Anlegevorgang
- Autoblockierungssystem, um ein Ausfädeln der Gurte bei Öffnung zu verhindern
- Anatomisch geformt und leicht anzulegen



#### INKL. PELOTTE:

**M.70010**

Standard  
Lumbalpelotte  
24x23 cm

#### OPTION:

**M.70020**

Hohe Lumbalpelotte  
24x31 cm



#### Artikelnummer

**M.90070**

#### Größen

Taillenumfang cm

Höhe vorne cm

Höhe hinten cm

Farbe

**S**

**M**

**L**

**XL**

**XXL**

70/85

85/100

100/115

115/130

130/145

16

16

16

16

16

26

26

26

26

26

weiß

**INKL. PELOTTE:** M.70010 Standard Lumbalpelotte

**OPTION:** M.70020 Hohe Lumbalpelotte

M.90074 Rückenschiene Dorsopull74



## lumbopull72

### LWS-Überbrückungsorthese mit Mobilisierungsfunktion

HMV-Nr.: 23.14.02.0015

#### INDIKATIONEN

- Lumbalgie
- Lumboischialgie und Lumbocuralgie
- Spondylarthrose und lumbale Diskopathien
- Leichtes Trauma der lumbosakralen Wirbelsäule und paravertebrale lumbale Muskelkontraktur
- Postoperative Behandlung
- Folgebeschwerden von Sinterungen der Lendenwirbelsäule
- Behandlung von Brüchen der Querfortsätze
- Degenerative lumbale Skoliose
- Spondylose mit oder ohne Lysis der Wirbelsäule



#### INKL. PELOTTE:

**M.70010**

Standard  
Lumbalpelotte  
24x23 cm

#### OPTION:

**M.70020**

Hohe Lumbalpelotte  
24x31 cm



#### EIGENSCHAFTEN

- Verbundenes Sandwichgewebe (innen 3D Gewebe und außen Spezialgewebe): hohe Festigkeit, um eine größtmögliche Stabilisierung zu garantieren; Atmungsaktiv für einen größtmöglichen Tragekomfort
- System von in Reihe gelegten Flaschenzügen und Spanngurten (exklusiv), um eine optimale Stabilisierung und Spannung bei minimalem Krafteinsatz zu erreichen
- Elastischer rückseitiger Einsatz (nicht strukturell), um den Kontakt des Rückens mit den Gurten zu verhindern und für das Anbringen der verschiedenen Optionen per Klett
- Schmale rückseitige Gurte, mit einer Gurtbreite von 2,5 cm
- Vordere Pelotte mit Verstärkung im Inneren verschleißt mit Eingriff für einen leichteren Anlegevorgang
- Autoblockierungssystem, um ein Ausfädeln der Gurte bei Öffnung zu verhindern
- Anatomisch geformt und leicht anzulegen

#### Artikelnummer

**M.90072**

#### Größen

#### Taillenumfang cm

#### Höhe vorne cm

#### Höhe hinten cm

#### Farbe

**S**

**M**

**L**

**XL**

70/85

85/100

100/115

115/130

20

20

20

20

31

31

31

31

weiß

**INKL. PELOTTE:** M.70010 Standard Lumbalpelotte

**OPTION:** M.70020 Hohe Lumbalpelotte

M.90074 Rückenschiene Dorsopull74



# Lumbopull70 forte

LWS-Überbrückungsorthese mit Mobilisierungsfunktion (inkl. PAD20)

HMV-Nr.: 23.14.02.1014

## INDIKATIONEN

- Schwere Lumboischialgie mit muskulären Ausfällen bei erheblichen Bandscheibenprotrusionen/ Prolaps, ohne absolute OP-Indikation
- Schweres radikuläres, pseudoradikuläres Lumbalsyndrom (konservativ therapieresistent)
- Spondylolisthese Grad II mit rezidivierenden Lumboischialgien
- Schwere lumbale Deformität bei Facettensyndrom/Arthrose z.B. BS-OP ohne verbliebene Parese bei ausgeräumter BS
- Spinalkanaldekompensation
- Spinalkanalstenose mit kurzer Gehstrecke ohne wesentliche Paresen
- Wirbelfrakturen posttraumatisch geringen Ausmaßes

## EIGENSCHAFTEN

- Verbundenes Sandwichgewebe (innen 3D Gewebe und außen Spezialgewebe): hohe Festigkeit, um eine größtmögliche Stabilisierung zu garantieren; Atmungsaktiv für einen größtmöglichen Tragekomfort
- System von in Reihe gelegten Flaschenzügen und Spanngurten (exklusiv), um eine optimale Stabilisierung und Spannung bei minimalem Kräfteinsatz zu erreichen
- Elastischer rückseitiger Einsatz (nicht strukturell), um den Kontakt des Rückens mit den Gurten zu verhindern und für das Anbringen der verschiedenen Optionen per Klett
- Schmale rückseitige Gurte, mit einer Gurtbreite von 2,5 cm
- Vordere Pelotte mit Verstärkung im Inneren verschweißt mit Eingriff für einen leichteren Anlegevorgang
- Autoblockierungssystem, um ein Ausfädeln der Gurte bei Öffnung zu verhindern
- Anatomisch geformt und leicht anzulegen



### INKL. PELOTTEN:

M.70010 + M. 70020

Standard  
Lumbalpelotte +  
Hohe Lumbalpelotte



| Artikelnummer    | M.90070F |        |         |         |         |
|------------------|----------|--------|---------|---------|---------|
| Größen           | S        | M      | L       | XL      | XXL     |
| Taillenumfang cm | 70/85    | 85/100 | 100/115 | 115/130 | 130/145 |
| Höhe vorne cm    | 16       | 16     | 16      | 16      | 16      |
| Höhe hinten cm   | 26       | 26     | 26      | 26      | 26      |
| Farbe            | weiß     |        |         |         |         |

INKL. PELOTTE: M.70010 Standard Lumbalpelotte +  
M.70020 Hohe Lumbalpelotte



# lumbopull72 forte

LWS-Überbrückungsorthese mit Mobilisierungsfunktion (inkl. PAD20)

HMV-Nr.: 23.14.02.1014

## INDIKATIONEN

- Schwere Lumboischialgie mit muskulären Ausfällen bei erheblichen Bandscheibenprotrusionen/ Prolaps, ohne absolute OP-Indikation
- Schweres radikuläres, pseudoradikuläres Lumbalsyndrom (konservativ therapieresistent)
- Spondylolisthese Grad II mit rezidivierenden Lumboischialgien
- Schwere lumbale Deformität bei Facettensyndrom/Arthrose z.B. BS-OP ohne verbliebene Parese bei ausgeräumter BS
- Spinalkanaldekompensation
- Spinalkanalstenose mit kurzer Gehstrecke ohne wesentliche Paresen
- Wirbelfrakturen posttraumatisch geringen Ausmaßes



**INKL. PELOTTEN:**  
**M.70010 + M. 70020**  
Standard  
Lumbalpelotte +  
Hohe Lumbalpelotte



## EIGENSCHAFTEN

- Verbundenes Sandwichgewebe (innen 3D Gewebe und außen Spezialgewebe): hohe Festigkeit, um eine größtmögliche Stabilisierung zu garantieren; Atmungsaktiv für einen größtmöglichen Tragekomfort
- System von in Reihe gelegten Flaschenzügen und Spanngurten (exklusiv), um eine optimale Stabilisierung und Spannung bei minimalem Krafteinsatz zu erreichen
- Elastischer rückseitiger Einsatz (nicht strukturell), um den Kontakt des Rückens mit den Gurten zu verhindern und für das Anbringen der verschiedenen Optionen per Klett
- Schmale rückseitige Gurte, mit einer Gurtbreite von 2,5 cm
- Vordere Pelotte mit Verstärkung im Inneren verschweißt mit Eingriff für einen leichteren Anlegevorgang
- Autoblockierungssystem, um ein Ausfädeln der Gurte bei Öffnung zu verhindern
- Anatomisch geformt und leicht anzulegen

### Artikelnummer

**M.90072F**

### Größen

### Taillenumfang cm

### Höhe vorne cm

### Höhe hinten cm

### Farbe

**S**

**M**

**L**

**XL**

70/85

85/100

100/115

115/130

20

20

20

20

31

31

31

31

weiß

**INKL. PELOTTE:** M.70010 Standard Lumbalpelotte +  
M.70020 Hohe Lumbalpelotte

# lumbosafe regular

## Lumbalstützorthese mit Mobilisierungsfunktion

HMV-Nr.: 23.14.02.0013



**OPTION:**

**P.T1030P**

Abdominalpelotte, erhältlich in 3 Größen



### INDIKATIONEN

- Lumbalgie
- Lumboischialgie und Lumbocruralgie
- Spondylarthrose und lumbale Diskopathien
- Leichtes Trauma der lumbosakralen Wirbelsäule und paravertebrale lumbale Muskelkontraktur
- Postoperative Behandlung
- Folgebeschwerden von Sinterungen der Lendenwirbelsäule
- Behandlung von Brüchen der Querfortsätze

### EIGENSCHAFTEN

- Innovatives Spannsystem mit Flaschenzug-Technik zur optimalen Stabilisierung und für einfaches Anlegen bei minimalem Kraftaufwand
- Festes, formbeständiges und atmungsaktives Gewebe für sicheren Halt, mit Bordüre aus hautsympathischem, besonders leichtem Material
- Auf der großen Klettverschlussfläche kann der Spanngurt in variablen Druckeinstellungen einfach fixiert werden
- Verstärkter Paravertebralbereich
- Stabile, leicht fixierbare, gepolsterte Rückenpelotte aus Hartplastik, die mit wenigen Handgriffen, je nach Therapieform, schnell ausgetauscht werden kann
- Gurtsystem in zwei verschiedenen Höhen LumboSafe Regular• Schulterpolster mit Sollposition

| Artikelnummer<br>Größen<br>Gurtumfang cm<br>Höhe M.T1030R (short)<br>Höhe M.T1031R (high)<br>Farbe | M.T1030R (short) . M.T1031R (high) |        |         |         |         |         |
|--|------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
|  | S                                  | M      | L       | XL      | XXL     | XXXL    |
|  | 79/90                              | 90/103 | 103/115 | 115/128 | 128/144 | 144/160 |
|  | 13/21                              | 13/21  | 15/22   | 18/23   | 20/24   | 23/25   |
|  | 19/25                              | 20/25  | 20/25   | 20/25   | 23/26   | 23/26   |
|  | schwarz                            |        |         |         |         |         |

**HINWEIS:** Im Set inbegriffen Lumbal-/Abdominalpelotte Regular

**OPTION:** P.T1030P leicht fixierbare Abdominalpelotte; erhältlich in 3 Größen, S/M, L/XL und XXL/XXXL



## lumbo-safe extra

Überbrückungsorthese mit Mobilisierungsfunktion

HMV-Nr.: 23.14.02.1010

### INDIKATIONEN

- Lumbalgie
- Lumboischialgie und Lumbocruralgie
- Spondylarthrose und lumbale Diskopathien
- Leichtes Trauma der lumbosakralen Wirbelsäule und paravertebrale lumbale Muskelkontraktur
- Postoperative Behandlung
- Folgebeschwerden von Sinterungen der Lendenwirbelsäule
- Behandlung von Brüchen der Querfortsätze
- Degenerative lumbale Skoliose
- Spondylose mit oder ohne Lysis der Wirbelsäule



### OPTION:

#### P.T1030P

Abdominalpelotte, erhältlich in 3 Größen



### EIGENSCHAFTEN

- Innovatives Spannsystem mit Flaschenzug-Technik zur optimalen Stabilisierung und für einfaches Anlegen bei minimalem Kraftaufwand
- Festes, formbeständiges und atmungsaktives Gewebe für sicheren Halt
- Auf der großen Klettverschlussfläche kann der Spanngurt in variablen Druckeinstellungen einfach fixiert werden
- Verstärkter Paravertebralbereich
- Stabile, leicht fixierbare, gepolsterte Rückenpelotte aus Hartplastik, die mit wenigen Handgriffen, je nach Therapieform, schnell ausgetauscht werden kann
- Gurtsystem in zwei verschiedenen Höhen

#### Artikelnummer

#### Größen

#### Gurtumfang cm

#### Höhe M.T1030E (short)

#### Höhe M.T1031E (high)

#### Farbe

#### M.T1030E (short) · M.T1031E (high)

| S     | M      | L       | XL      | XXL     | XXXL    |
|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 79/90 | 90/103 | 103/115 | 115/128 | 128/144 | 144/160 |
| 13/21 | 13/21  | 15/22   | 18/23   | 20/24   | 23/25   |
| 19/25 | 20/25  | 20/25   | 20/25   | 23/26   | 23/26   |

schwarz

**HINWEIS:** Im Set inbegriffen Lumbal-/Abdominalpelotte Extra

**OPTION:** P.T1030P leicht fixierbare Abdominalpelotte; erhältlich in 3 Größen, S/M, L/XL und XXL/XXXL



# lumbosafe chairback

**Orthese zur Überbrückung und Mobilisierung der Lendenwirbelsäule**

HMV-Nr.: **23.14.04.1012**

### INDIKATIONEN

- Spondylarthrose und lumbale Diskopathien
- Postoperative Behandlung
- Folgebeschwerden von Sinterungen der Lendenwirbelsäule
- Behandlung von Brüchen der Querfortsätze
- Degenerative lumbale Skoliose
- Spondylose mit oder ohne Lysis der Wirbelsäule
- Folgebeschwerden von Wirbelbrüchen im lumbosakralen Bereich

### EIGENSCHAFTEN

- Innovatives Spannsystem mit Flaschenzug-Technik zur optimalen Stabilisierung und für einfaches Anlegen bei minimalem Kraftaufwand
- Festes, formbeständiges und atmungsaktives Gewebe für sicheren Halt
- Auf der großen Klettverschlussfläche kann der Spanngurt in variablen Druckeinstellungen einfach fixiert werden
- Verstärkter Paravertebralbereich
- Stabile, leicht fixierbare, gepolsterte Rückenpelotte aus Hartplastik, die mit wenigen Handgriffen, je nach Therapieform, schnell ausgetauscht werden kann
- Gurtsystem in zwei verschiedenen Höhen



#### OPTION:

**P.T1030P**

Abdominalpelotte, erhältlich in 3 Größen



| Artikelnummer         | M.T1030C (short) · M.T1031C (high) |        |         |         |         |         |
|-----------------------|------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
|                       | S                                  | M      | L       | XL      | XXL     | XXXL    |
| Größen                |                                    |        |         |         |         |         |
| Gurtumfang cm         | 79/90                              | 90/103 | 103/115 | 115/128 | 128/144 | 144/160 |
| Höhe M.T1030C (short) | 13/21                              | 13/21  | 15/22   | 18/23   | 20/24   | 23/25   |
| Höhe M.T1031C (high)  | 19/25                              | 20/25  | 20/25   | 20/25   | 23/26   | 23/26   |
| Farbe                 | schwarz                            |        |         |         |         |         |


**HINWEIS:** Im Set inbegriffen Lumbal-/Abdominalpelotte Chairback

**OPTION:** P.T1030P leicht fixierbare Abdominalpelotte; erhältlich in 3 Größen, S/M, L/XL und XXL/XXXL



# lumbosafe

**Lumbosafe** ist ein modulares System, das in drei Versionen (Regular, Extra, Chairback) verfügbar ist. Ein Set besteht aus einem Gürtel als Basis und einer von drei unterschiedlichen Lenden-Pelotten. Durch sie bietet das LumboSafe-Korsett eine passgenaue Lösung, die je nach Indikation, Therapiestatus und Anatomie des Patienten exakt abgestimmt werden kann.
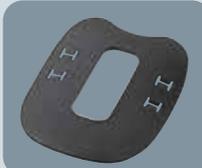
| Zubehör<br><br>Korsett Art  | Pelotte Regular   | Pelotte Extra  | Pelotte Chairback  |
|---|---|--|--|
|   |  <p><b>Lumbosafe Regular</b> mit niedriger, gepolsterter Lumbalpelotte zur Stabilisierung der Lendenwirbelsäule. Diese Pelotte kann auch abdominal verwendet werden.</p> |  <p><b>Lumbosafe Extra</b> mit höherer, gepolsterter Lumbalpelotte, zur Stabilisierung eines größeren Bereichs der Lendenwirbelsäule.</p> |  <p><b>Lumbosafe Chairback</b> mit einem stabilen Rahmen zur Stützung der Wirbelsäule und einer zusätzlichen lateralen Stabilisierung.</p> |
|   | lumbosafe regular   | lumbosafe extra  | lumbosafe chairback  |
|  <p><b>SHORT</b><br/>Höhe vorne 13-23* cm<br/>Höhe hinten 21-25* cm<br/>*abhängig von der Größe</p> |  <p><b>M.T1030R</b></p>   |  <p><b>M.T1030E</b></p>  |  <p><b>M.T1030C</b></p>   |
|   | lumbosafe regular   | lumbosafe extra  | lumbosafe chairback  |
|  <p><b>HIGH</b><br/>Höhe vorne 19-23* cm<br/>Höhe hinten 25-26* cm<br/>*abhängig von der Größe</p> |  <p><b>M.T1031R</b></p>  |  <p><b>M.T1031E</b></p>   |  <p><b>M.T1031C</b></p>  |



## spinalplus 2.0

**Orthese zur aktiven Entlastung und Korrektur der LWS/BWS**

HMV-Nr.: **23.15.04.4015**

### INDIKATIONEN

- Dorsolumbalgie nach Abheilung von Sinterungen der dorsolumbalen Wirbel
- Osteoporotisch oder metastatisch bedingte Sinterungen der dorsolumbalen Wirbel
- Posttraumatische oder arthrotisch bedingte Kyphose der Brustwirbelsäule
- Juvenile Osteochondrose

Patent: **EP2502608**



Spanngurte im Rücken- und Bauchbereich, aus tragefreundlichem Material



### EIGENSCHAFTEN

- Innerer Aufbau aus modellierbarer, strahlendurchlässiger Aluminiumlegierung
- Patentiertes Schnürsystem (Patent EP2502608):
  - Bauchbandage mit Korsett
  - einmaliges Schnürsystem: Durch das Spannen der Pelotten werden alle Gurte am Rücken und an den Schultern gespannt
  - Kräfte-Multiplikation, um die Zugkraft an den Schultern zu verdoppeln
- Dorsal-abdominale Gurte mit hautverträglichen Schnallen
- Direkte Befestigung der dorsalabdominalen Gurte am Metallrahmen durch sich von selbst ausrichtenden Schnallen und Knöpfen
- Bauchkorsett für mehr Komfort und Stabilität:
  - mit Klettverschluss
  - längenverstellbar
  - elastischer Bereich aus Doppelgewebe
- Elastischer Einsatz im Dorsalbereich
- Schulterpolster mit Sollposition

Artikelnummer

**M.33049**

Größen

**XS**

**S**

**M**

**L**

Abstand T1-L5 cm

35/41

41/47

47/54

54/61

Beckenumfang cm

70/125

70/125

70/125

70/125

Farbe

grau



## spinalplus

Orthese zur aktiven Entlastung und Korrektur der LWS/BWS

HMV-Nr.: 23.15.04.4015

### INDIKATIONEN

- Dorsolumbalgie nach Abheilung von Sinterungen der dorsolumbalen Wirbel
- Osteoporotisch oder metastatisch bedingte Sinterungen der dorsolumbalen Wirbel
- Posttraumatische oder arthrotisch bedingte Kyphose der Brustwirbelsäule
- Juvenile Osteochondrose

Patent: EP2502608



Klettverschluss



Elastischer Einsatz mit biodynamischer Wirkung



### EIGENSCHAFTEN

- Gepolsterte Schultergurte mit voreinstellbaren Positionseinstellungen
- Klettverschluss
- Elastischer Einsatz mit biodynamischer Wirkung
- Formbarer Innenrahmen aus Aluminiumlegierung, röntgendurchlässig (ausgenommen die Druckknöpfe)
- Spanngurte im Rücken- und Bauchbereich, aus tragfreundlichem Gurtmaterial
- Schnallen mit selbstausrichtenden Verankerungspunkten
- Zweischichtige PE-Polsterung mit Überzug aus Velours und Netzstoff

Artikelnummer

M.T1049

Größen

XS

S

M

L

Abstand T1-L5 cm

35/41

41/47

47/54

54/61

Farbe

blau



# e-stab

## 3-Punkt-Hyperextensions-Orthese

HMV-Nr.: 23.15.04.1011

### INDIKATIONEN

- Traumatische Frakturen (T10-L1/L2)
- Osteoporotisch oder metastatisch bedingte Sinterungen im Bereich der BWS und des dorsolumbalen Übergangs (T10-L1/L2)
- Osteomalazien mit Frakturen
- Dorsolumbale Arthrose
- Ersatz für ein Gipskorsett

### EIGENSCHAFTEN

- Struktur:
  - Rahmen aus leichter Aluminiumlegierung ohne Kanten am Metall für maximalen Komfort.
  - Teleskopischer Aufbau: kann sowohl in horizontaler als auch vertikaler Richtung reguliert werden, ohne die Schrauben zu entfernen, sondern einfach nur, indem man sie lockert.
- Beckengürtel:
  - Flexibel
  - Teleskopischer Aufbau
  - Flexible und widerstandsfähige Polymer-Endstücke für eine optimale Anpassung an die Anatomie des Patienten.
  - Möglichkeit der Blockierung einstellbar bei 0°, 18° oder 36° mithilfe von Stiften
- Möglichkeit zum Einstellen des sternalen Drucks (Neigung) durch ein Zahnradsystem an den Winkeln unter den Achseln (um jeweils 7,5°)
- Bewegliche Sternalpelotte
- Verschluss:
  - Hebel aus widerstandsfähigem, leichtem Acetalharz mit Sicherheitsblockierung
  - Exklusives Justiersystem für die Gurtlängen mit Doppelgurtschnallen und speziellem Hakenverschluss-System.
- Anatomisch geformte, dorsal-lumbale Pelotte

Patent: registered  
community design



### OPTION:

- M.IP35/PC** Connect Verbindungsplatte zwischen der Zervikalstütze Cervistable und der Hyperextensions-Orthese
- M.IP35/P** Sternal-Halbpelotte für Träger von Herzschrittmachern
- M.P1000/IA** Achselschutzpolster aus hypoallergem, hautfreundlichem Material

| GRÖSSEN         | 1     |       | 2      |       | 3       |       |
|-----------------|-------|-------|--------|-------|---------|-------|
|                 | 1S    |       | 2S     |       | 3S      |       |
| Beckenumfang cm | 50-75 |       | 75-105 |       | 105-135 |       |
| Höhe cm         | 41-54 | 30-41 | 41-54  | 30-41 | 41-54   | 30-41 |

\*gemessen proximal vom Brustbein bis zum oberen Rand des Schambeins (Tuberculum pubicum)



# nhyco

## 3-Punkt-Hyperextensions-Orthese

HMV-Nr.: 23.15.04.0005

### INDIKATIONEN

- Extension und Immobilisierung der dorso-lumbalen Wirbelsäule
- Postoperative Immobilisierung
- Postoperativ zur Ruhigstellung der LWS
- Morbus Scheuermann
- Wirbelsinterungen bei Osteoporose
- Wirbelsinterungen bei Metastasen

### EIGENSCHAFTEN

- Rahmen aus einer leichten Aluminiumlegierung (mit weniger als 700g Gewicht)
- Verstellbare und bewegliche Sternal- und Symphysenpelotten
- Lumbale Pelotte in drei Größen: klein (horizontal) - normal - lang
- Austauschbare Polster aus wasserfestem, atoxischem und latexfreiem Material
- Der PLUS Verschluss (Sicherheitsverschluss) ist einfach zu öffnen und zu verschließen, er garantiert einen konstanten Lumbaldruck
- Teleskop-Schienen, verstellbar ohne die Schrauben zu entnehmen



PLUS Verschluss  
aus leichtem,  
widerstandsfähigem  
Verbundwerkstoff



### Artikelnummer

### M.D100

### Größen

### standard

### regular

### long

Höhe Sternum bis  
Symphyse in cm

27/34

34/40

41/53

Hüftumfang max.  
in cm

90

120

120

Farbe

weiß



SCHULTER



# shouldercross

## Schultergelenk-Kompressionsbandage

HMV-Nr.: 05.09.01.0006

### INDIKATIONEN

- Konservative Behandlung bei Instabilität nach glenohumeraler Luxation vorne und hinten
- Schutz bei risikobehafteter Arbeit oder Sport, vor oder nach einer OP zur Stabilisation
- Unterstützend bei der Rehabilitation von schmerzhafter Hyperlaxität oder funktionsrelevanter Instabilität
- Unterstützend nach größeren Eingriffen an der Rotatorenmanschette oder bei konservativen Behandlungen von schwerwiegenden Rissen der Rotatormanschette
- Unterstützend bei der Rehabilitation von Schulterblatt-Dyskinesien



### EIGENSCHAFTEN

- Aus atmungsfähigem BreathSkill Gewebe
- Überkreuzende, elastische Bänder für die optimale Stabilisierung des Gelenks
- Verstellbarer, konterlateraler Brustgurt mit elastischem Einsatz und Achselpolster
- Verstellbare Armschlinge mit elastischem Einsatz und Klettverschluss
- Verstärkungspelotte aus visko-elastischem Material, innen mit Klettverschluss anwendbar

Artikelnummer

M.20726 rechts oder links angeben

Größen

S

M

L

XL

XXL

Umfang Bizeps in cm

22/26

26/30

30/35

35/40

40/45

Farbe

grau



# octofix (CVB)

## Claviculabandage

HMV-Nr.: 05.09.02.0033

### INDIKATIONEN

- Fraktur des Schlüsselbeins
- Subluxation des Acromioclaviculargelenks

### EIGENSCHAFTEN

- Aus Gazegewebe mit Polsterung
- Aufbau nach Art der Achterbandage mit rückseitigem Klettverschluss



Aus Gazegewebe  
mit Polsterung



|                   |        |       |        |         |         |         |
|-------------------|--------|-------|--------|---------|---------|---------|
| Artikelnummer     | M.8503 |       |        |         |         |         |
| Größen            | XS     | S     | M      | L       | XL      | XXL     |
| Brustumfang in cm | 55/70  | 70/85 | 85/100 | 100/110 | 110/120 | 120/135 |
| Farbe             | weiß   |       |        |         |         |         |



## acromion 2.0



Notfallprodukt

### Clavicula-Orthese

HMV-Nr.: 23.09.01.0072

#### INDIKATIONEN

- Konservative Behandlung zur Stabilisierung des Acromioclaviculargelenks nach einer Luxation Grad 1, 2 und 3 (gemäß ärztlicher Beurteilung)
- Konservative Behandlung bei Frakturen des distalen Endes der Clavicula (gemäß ärztlicher Beurteilung)

#### EIGENSCHAFTEN

- System aus Trage- und Spanngurten konzipiert für ein Herabdrücken der Clavicula und ein Anheben der Schulter, um Acromion und Clavicula wieder aufeinander auszurichten
- Flexible anatomisch geformte Schulterkappe mit Polster aus Polyethylenschaumstoff, mit Drehgelenken
- Zugbänder an der Vorderseite mit konstanter, voreingestellter Spannung
- Verstellbare Ellenbogentasche mit Polyethylen-Polsterung für angenehmen Tragekomfort
- Gurte und Brustgurt aus Velour, auf die benötigte Größe anpassbar

Patent: EP2591757



0° Abduction

Artikelnummer

Größen

Farbe

M.S1063 rechts oder links angeben

universal

blau



## shouldfix open



Notfallprodukt

### Schultergelenkorthese zur Immobilisierung in definierter Position


HMV-Nr.: 23.09.01.0024

#### INDIKATIONEN

- Einfache Oberarmfrakturen
- Glenohumeralluxation
- Schulterdistorsionen
- Postoperative Behandlung von Humerusfrakturen und Eingriffen bei Glenohumeralluxation
- Postoperative Versorgung bei Sehennaht des langen Kopfes des Bizepsmuskels

#### EIGENSCHAFTEN

- Aus weichem Material mit hohem Tragekomfort
- Schulterzuggurt mit Steckschnallenverschluss

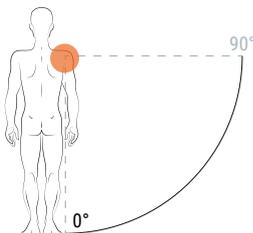

Artikelnummer

REF.8410

Größen

Regular

Large

Bauchumfang in cm


< 120

> 120

Farbe

schwarz

beidseitig anwendbar

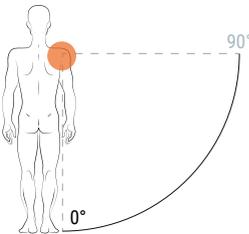

## shouldfix light



Notfallprodukt

### Schultergelenkorthese zur Immobilisierung in definierter Position

HMV-Nr.: 23.09.01.0096

#### INDIKATIONEN

- Kurzfristige postoperative Ruhigstellung nach subakromialen Dekompressionen, Kalkentfernungen, Rotatorenmanschettennähten, Implantatentfernungen, Arthrolysen, Osteosynthesen, inversen Prothesen und vielen anderen
- Alle Krankheitsbilder, die eine frühfunktionelle Beübung benötigen (freie Beweglichkeit des Ellenbogens und des Handgelenks)
- Bei Schulterprellungen oder Verstauchungen

#### EIGENSCHAFTEN

- Rutschfester Bauchgurt aus gepolstertem Gewebe, mit Klettstreifen zum Justieren
- Gurt für den Oberarm, individuell anpassbar, auch in der Höhe
- Zwei optionale Unterarmschlingen aus gepolstertem Gewebe, mit Klettbefestigung zum richtigen Positionieren am Bauchgurt

Artikelnummer

M.20413

Größen

Einheitsgröße

Farbe

schwarz

beidseitig anwendbar



Notfallprodukt

## shouldfix 3

### Schultergelenkorthese zur Immobilisierung in definierter Position


HMV-Nr.: 23.09.01.0095

#### INDIKATIONEN

- Prellungen
- Distorsionen
- Vordere Luxationen
- Einfache Frakturen
- Postoperative Ruhigstellung nach Schulterarthroskopien, Frakturversorgungen und Endoprothesen

#### EIGENSCHAFTEN

- Armschlinge aus Baumwoll-Polyester-Gewebe, mit Ellenbogentasche
- Brustgurt mit Klettverschluss, im mittleren Bereich gepolstert
- Schultergurt mit Klettverschluss, im mittleren Bereich gepolstert
- Alle Klettverschlüsse, Ringe und Gurte der Shouldfix 3 sind farbcodiert um das Handling für den Patienten und Spezialisten möglichst einfach zu gestalten

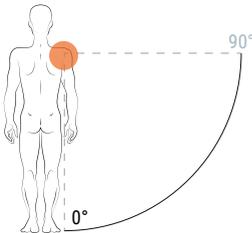

Artikelnummer

M.20414

Größen

S

M

L

XL

Unterarmlänge\* cm

28/34

34/42


42/48

48/58

Farbe

schwarz

\*Gemessen vom Ellbogen bis zum Ende der geschlossenen Faust beidseitig anwendbar

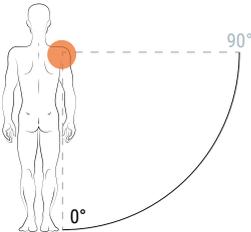

## sling-up 2.0



Notfallprodukt

### Schultergelenkorthese zur Immobilisierung in definierter Position

HMV-Nr.: 23.09.01.0097

#### INDIKATIONEN

- Abstützung für Unterarm und Handgelenk
- Hilfreich bei Gipsarm
- Hilfreich bei notwendiger Ruhestellung des Acromioclavicular Gelenks (nach Subluxation 1. Grades) oder des Glenohumeral Gelenks
- Hilfreich bei notwendiger Immobilisation des Arms mit flektiertem Ellenbogen

#### EIGENSCHAFTEN

- Struktur aus Baumwollmischgewebe
- Schultergurt mit MTP-Schaumstoff gepolstert und mit Samtgewebe bezogen
- Praktischer Gurtverschluss mit verstellbarem Klettband

#### Artikelnummer

M.8404

#### Größen

Länge der Unterarmtasche in cm

#### Farbe

| S       | M  | L  | XL |
|---------|----|----|----|
| 34      | 42 | 48 | 58 |
| schwarz |    |    |    |

beidseitig anwendbar



## top 4-s

**Schultergelenkorthese zur Entlastung und Korrektur, 10°-15° Abduktion**

HMV-Nr.: 23.09.04.0061

### INDIKATIONEN

- Postoperative Versorgung (Abduktion) nach operativen Eingriffen an der Rotatorenmanschette, Naht des Labrum glenoidale, Kapselstabilisierung, nach operativen Eingriffen am Weichgewebe der Schulter

### EIGENSCHAFTEN

- Taschenstruktur aus hochdichtem Schaumgummi, innen beschichtet mit Silberfasergewebe
- Stabilisierendes Polster mit vorderem Rand; bequeme, keilförmige Armauflage
- Armhalterung aus atmungsaktivem Material
- Längenverstellbare Gurte mit Schnellverschlüssen
- Abduktion justierbar auf 10° oder 15° mittels Markierungen am Polster, für die korrekte Anordnung der Armschlaufe



Artikelnummer


M.E410 rechts oder links angeben

Größe

universal

Farbe

schwarz

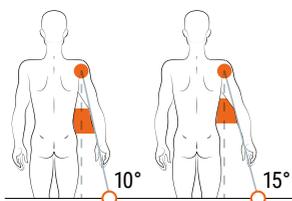



## top III-S 10°

### Schultergelenkorthesen zur Entlastung und Korrektur, 10° Abduktion

HMV-Nr.: 23.09.04.0033

#### INDIKATIONEN


- Postoperative Versorgung (Abduktion) nach operativen Eingriffen an der Rotatorenmanschette, Naht des Labrum glenoidale, Kapselstabilisierung, nach operativen Eingriffen am Weichgewebe der Schulter

#### EIGENSCHAFTEN

- Abduktion bei 10°
- Kissen aus hochdichtem Schaumstoff. Silberfasern sind in das Gewebe mit direktem Körperkontakt eingewoben
- Kissen mit Verstärkung an der Vorder- und Hinterseite für optimale Stabilität
- Armtragetuch aus atmungsaktivem Stoff
- Rehabilitationsball
- Schlaufe zur Stützung des Daumens



Kissen aus hochdichtem Schaumstoff

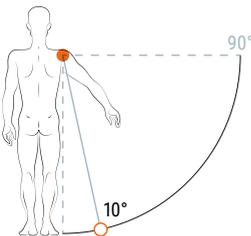

|                   |         |      |
|-------------------|---------|------|
| Artikelnummer     | M.E112  |      |
| Größen            | S       | L    |
| Unterarmlänge cm* | < 38    | > 39 |
| Farbe             | schwarz |      |

\*Gemessen vom Ellenbogen bis zum Ende der geschlossenen Faust  
beidseitig anwendbar



## top II-S 10°/15°

Schultergelenkorthese zur Entlastung und Korrektur, 10° oder 15° Abduktion

HMV-Nr.: 23.09.04.0033

### INDIKATIONEN


- Postoperative Versorgung (Abduktion) nach operativen Eingriffen an der Rotatorenmanschette, Naht des Labrum glenoidale, Kapselstabilisierung, nach operativen Eingriffen am Weichgewebe der Schulter

### EIGENSCHAFTEN


- Abduktion bei 10° oder 15°
- Kissen aus hochdichtem Schaumstoff. Silberfasern sind in das Gewebe mit direktem Körperkontakt eingewoben
- Kissen mit Verstärkung an der Vorder- und Hinterseite für optimale Stabilität
- Armtragetuch aus atmungsaktivem Stoff
- Rehabilitationsball



Kissen aus hochdichtem Schaumstoff

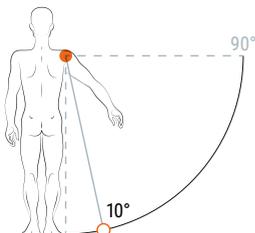

M.E111: 10°

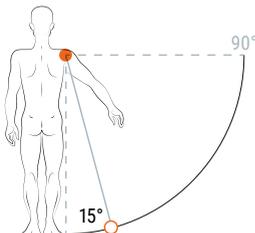

M.E211: 15°

|                   |                         |      |
|-------------------|-------------------------|------|
| Artikelnummer     | M.E111 10° · M.E211 15° |      |
| Größen            | S                       | L    |
| Unterarmlänge cm* | < 38                    | > 39 |
| Farbe             | schwarz                 |      |

\*Gemessen vom Ellenbogen bis zum Ende der geschlossenen Faust  
beidseitig anwendbar



# extra-s 15°

## Schultergelenkorthese zur Entlastung und Korrektur, 15° Außenrotation

HMV-Nr.: 23.09.04.0049


### INDIKATIONEN

- Postoperative Versorgung (Außenrotation) nach operativen Eingriffen an der Rotatorenmanschette, Naht des Labrum glenoidale, Kapselstabilisierung, nach operativen Eingriffen am Weichgewebe der Schulter
- Konservative Behandlung des Anfangsstadiums einer Luxation des Glenohumeralgelenks



### EIGENSCHAFTEN

- Kissen aus hochdichtem Schaumstoff. Silberfasern sind in das Gewebe mit direktem Körperkontakt eingewoben
- Polstermanschette zum Schutz des Halses
- Außenbezug und Manschetten aus geraumtem Nylon für die Befestigung der Klettverschlüsse und verstellbaren
- Möglichkeit einer Außenrotation von 15°
- Rehabilitationsball
- Unterarmtasche aus atmungsaktivem Stoff

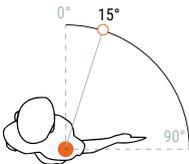

Artikelnummer rechts

M.E113 15°

Artikelnummer links

M.E114 15°

Größen

S

M

L

Unterarmlänge cm\*

< 34

35/39

> 40

Farbe

schwarz

\*Gemessen vom Ellenbogen bis zum Ende der geschlossenen Faust



## extra-s 30°

Schultergelenkorthese zur Entlastung und Korrektur, 30° Außenrotation


HMV-Nr.: 23.09.04.0049

### INDIKATIONEN

- Postoperative Versorgung (Außenrotation) nach operativen Eingriffen an der Rotatorenmanschette, Naht des Labrum glenoidale, Kapselstabilisierung, nach operativen Eingriffen am Weichgewebe der Schulter
- Konservative Behandlung des Anfangsstadiums einer Luxation des Glenohumeralgelenks

### EIGENSCHAFTEN

- Kissen aus hochdichtem Schaumstoff. Silberfasern sind in das Gewebe mit direktem Körperkontakt eingewoben
- Außenbezug und Manschetten aus gerautem Nylon für die Befestigung der Klettverschlüsse und verstellbaren
- Möglichkeit einer Außenrotation von 30°
- Rehabilitationsball
- Unterarmtasche aus atmungsaktivem Stoff

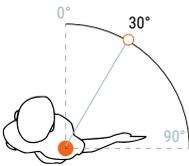

Artikelnummer rechts

M.E115 30°

Artikelnummer links

M.E116 30°

Größen

S

M

L

Unterarmlänge cm\*

< 34

35/39

> 40

Farbe

schwarz

\*Gemessen vom Ellenbogen bis zum Ende der geschlossenen Faust





ELLENBOGEN



## epilastik 32

### Ellenbogen-Kompressionsbandage

HMV-Nr.: 05.08.01.1059

#### INDIKATIONEN

- Epicondylitis und Epitrochleitis des Ellenbogens
- Chronische Schmerzen durch Bursitis oder Tendinitis

#### EIGENSCHAFTEN

- Struktur aus dynamischem Gewebe mit differenzierten Kompressionsbereichen
- Passform für breites Patientenklintel
- Silikoneinsätze zur Entlastung von Epicondylus und Epitrochlearis und Druckbereichen am Unterarm
- Mit Silikon verstärkter oberer Randabschluss für mehr Komfort und Widerstandsfähigkeit beim Anziehen



Position der  
Silikonverstärkung

Artikelnummer

M.90132

Größen

| 0     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 17/19 | 19/21 | 21/23 | 23/25 | 25/27 | 27/29 | 29/31 |

Umfang des  
Unterarms 13 cm  
vom Epicondylus cm

Farbe

blau

beidseitig anwendbar

NEU



## elbo PRO

**Ellenbogen-Orthese zur Mobilisierung in einstellbaren Bewegungsumfängen mit Handteil**

HMV-Nr.: 23.08.02.2

### INDIKATIONEN

- Stabile Frakturen des Ellenbogens, des distalen Humerus, Radius und der proximalen Ulna
- Mobilisierung nach operativen Eingriffen und Traumen mit Beteiligung des Radius-Ulnar-Gelenks
- Postoperative Ruhigstellung nach Eingriffen an Sehnen und Bändern
- Für die Anwendung in der Rehabilitationsphase nach konservativer und chirurgischer Behandlung von Frakturen des Ellenbogens
- Subluxationen und Luxationen des Ellenbogens
- Chronische Verletzungen des Ellenbogens
- Hyperextension des Ellenbogens
- Posttraumatische Behandlung

### EIGENSCHAFTEN

- Teleskopierbare Schienen aus leichtem Aluminium.
- Halterung aus Polyamid mit modellierbarer Manschette aus Aluminium zum Aufnehmen des Arms für eine perfekte individuelle Anpassung
- Neues, leichtes „Pull&Set“-Gelenk zum Regulieren der Flexion/Extension, aus leichtem Polymermaterial; intuitiv und sicher einstellbar:
  - Flexion: von -10° bis +120° in 10°-Schritten
  - Extension: von -10° bis +90° in 10°-Schritten
  - Möglichkeit des schnellen Verriegelns des Gelenks
  - Schritten alles komplett ohne zusätzliches Werkzeug
- One-Size-Prinzip
- Gurtführungen im Lieferumfang enthalten



Teleskopierbare Schiene durch einfacher Tastendruck



Neues, leichtes „Pull&Set“-Gelenk zum Regulieren der Flexion/Extension



Neutrale Handauflage und Schultergurt inklusive

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Artikelnummer        | M.24017R - M.24017L |
| Größen               | Universell          |
| Länge der Schiene cm | 36-46               |
| Farbe                | Dunkelgrau          |

rechts oder links angeben

ELLENBOGEN





ORTHOSERVICE  
RD+TEN  
*Take care feel better*

ORTHOSERVICE  
RD+TEN  
*Take care feel better*

Das Problem  
verstehen  
Lösung  
So entstehen

HAND

UNTERARM

HAND  
UNTERARM

NEU



# ePiFEEL

## Epicondylitis-Spange mit Druckpelotte

HMV-Nr.: 23.08.04.0046

### INDIKATIONEN

- Bei medialer oder lateraler Epicondylitis
- Ellenbogenschmerzen aufgrund von Überbeanspruchung
- Vorbeugung von sportbedingten Entzündungen

### EIGENSCHAFTEN

- Fläche aus Kunststoff für eine optimale Druckverteilung
- Pelotte, um den Druck zu bündeln; gefertigt aus rutschfestem TPE, um das Positionieren der Bandage zu erleichtern
- Dosierter Gummizug für präzise Druckkontrolle
- Klettverschluss mit Ringschlaufe
- One-Size-Prinzip: Regulierung der Gurtlänge



Bei medialer Epicondylitis  
(Golferellenbogen)

|               |            |
|---------------|------------|
| Artikelnummer | M.24022    |
| Größen        | Universell |
| Farbe         | grau       |

beidseitig anwendbar



# manulastik 19

## Elastische Handgelenk-Bandage

HMV-Nr.: **05.07.02.0146**

### INDIKATIONEN

- Verstauchung des Handgelenks und der Handwurzel
- Sehnenentzündung der Hand und des Unterarms
- Arthritische Erkrankung des Handgelenks
- Postoperative und konservative Nachbehandlung des Handgelenks
- Nachbehandlung eines Handgelenkbruchs

### EIGENSCHAFTEN

- Struktur aus dynamischem Gewebe mit differenzierten Kompressionsbereichen
- Körpergerechtes Design
- Daumenloch
- Handflächenversteifung aus Kunststoff
- Klettbandverschluss am Handgelenk
- Silikoneinsatz für den Griffelfortsatz
- Mit Silikon verstärkter Randabschluss für besseren Komfort



Position der  
Silikonverstärkung

**Artikelnummer**

**M.90119** rechts oder links angeben

**Größen**

| 0     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 |

**Umfang des  
Handgelenks cm**

**Farbe**

blau



## manulite



Notfallprodukt

### Handgelenkorthese zur Immobilisierung in zwei Bewegungsrichtungen

HMV-Nr.: 23.07.02.4049

#### INDIKATIONEN

- Verstauchung des Handgelenks
- Mehrfacher Bruch von Speiche und Elle im Unterarm
- Tendinitis des Handgelenks
- Arthrotische und arthritische Erkrankung
- Nachbehandlung eines Handgelenksbruchs



#### EIGENSCHAFTEN

- Flaches Profil
- Aufbau:
  - Außenseite: nicht dehnbare Samtgewebe
  - Polsterung: aus MTP um die Stäbe
  - Innenseite (an der Haut): Soft Touch (hautverträglich, bequem, atmungsaktiv, maschenfest und antistatisch)
- Daumenloch mit komfortablem Saum aus Soft Touch eingefasst
- Starre Verstärkung am Handrücken
- Verschluss mit Schnallen und Klettband Velcro®
- Mikro-Klettband zum Justieren des Verschlussbands
- Formstabile Schiene aus Aluminium für die Handfläche, vorgeformt und modellierbar nach ärztlicher Indikation



#### Artikelnummer

M.90100

#### Größen

S

M

L

#### Handgelenkumfang in cm

13/18

18/23

23/28

#### Länge cm

21

21

21

#### Farbe

schwarz

beidseitig anwendbar



## polFIT 19



Notfallprodukt

### Handgelenkorthese zur Immobilisierung in zwei Bewegungsrichtungen

HMV-Nr.: 23.07.02.4030

#### INDIKATIONEN

- Verstauchung des Handgelenks
- Mehrfacher Bruch von Speiche und Elle im Unterarm
- Tendinitis des Handgelenks
- Arthrotische und arthritische Erkrankung
- Nachbehandlung eines Handgelenksbruchs

#### EIGENSCHAFTEN

- Struktur aus atmungsaktivem 3D-Gewebe
- Verstärkungsschiene des Handrückens
- Verschluss mit Schnallen und Klettbindern
- Formstabile Schiene aus Aluminium für die Handfläche, vorgeformt und modellierbar nach ärztlicher Indikation



#### Artikelnummer

**M.P1119** rechts oder links angeben

#### Größen

| S | M | L | XL |
|---|---|---|----|
|---|---|---|----|

#### Handgelenkumfang in cm

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 13/16 | 16/18 | 18/20 | 20/23 |
|-------|-------|-------|-------|

#### Länge cm

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 20 | 20 | 20 | 20 |
|----|----|----|----|

#### Farbe

schwarz



Notfallprodukt



## polFIT 21

### Handgelenkorthese zur Immobilisierung

HMV-Nr.: 23.07.02.4041

#### INDIKATIONEN

- Behandlung von Mischbrüchen der distalen Epiphysis des Radius und der Elle, die der Orthopäde als stabil beurteilt
- Postoperative Behandlung von instabilem, distalem Radius- und Ellenbruch
- Verstauchung des Handgelenks oder Sehnenentzündung
- Karpalgelenkbruch (ausgenommen das Kahnbein), sowohl nach chirurgischem Eingriff wie auch bei konservativer Behandlung
- Karpalgelenkarthrose

#### EIGENSCHAFTEN

- Komplette Öffnung an der Rückseite
- Struktur aus atmungsaktivem 3D-Gewebe
- Verschluss mit vier Schnallen und Klettbandern
- Verstärkungsschienen des Handrückens
- Formstabile Schiene aus Aluminium für die Handfläche, vorgeformt und modellierbar nach ärztlicher Indikation



|                               |  |          |          |           |
|-------------------------------|--|----------|----------|-----------|
| <b>Artikelnummer</b>          | <b>M.P1121</b> rechts oder links angeben |          |          |           |
| <b>Größen</b>                 | <b>S</b>                                 | <b>M</b> | <b>L</b> | <b>XL</b> |
| <b>Handgelenkumfang in cm</b> | 13/16                                    | 16/18    | 18/20    | 20/23     |
| <b>Länge cm</b>               | 26                                       | 26       | 26       | 26        |
| <b>Farbe</b>                  | schwarz                                  |          |          |           |



Notfallprodukt



## polFIT 22

### Handgelenkorthese mit Daumenfixierung zur Immobilisierung

HMV-Nr.: 23.07.02.2043

#### INDIKATIONEN

- Schrägfraktur des ersten Mittelhandknochens
- Distorsion des ulnaren Kollateralbandes der Mittelhand- und Fingerknochen des Daumens
- Verdacht auf Kahnbeinfraktur

#### EIGENSCHAFTEN

- Verstärkungsschienen am Handrücken aus Kunststoff
- Verschluss mit Umlenkschleufe und Klettbindern
- Formstabile Schiene aus Aluminium für den Daumen, vorgeformt und modellierbar nach ärztlicher Indikation
- Formstabile Schiene aus Aluminium für die Handfläche, vorgeformt und modellierbar nach ärztlicher Indikation



Artikelnummer

M.P1122 rechts oder links angeben

Größen

| S | M | L | XL |
|---|---|---|----|
|---|---|---|----|

Handgelenkumfang in cm

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 13/16 | 16/18 | 18/20 | 20/23 |
|-------|-------|-------|-------|

Länge cm

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 26 | 26 | 26 | 26 |
|----|----|----|----|

Farbe

schwarz



## polFIT 17



Notfallprodukt

### Handgelenkorthese mit Daumenfixierung zur Immobilisierung

HMV-Nr.: 23.07.02.2020

#### INDIKATIONEN

- Verstauchung des Handgelenks
- Tendinitis des Handgelenks
- Arthrotische und arthritische Erkrankung
- Zur Nachbehandlung eines Bruchs
- Arthrose des Daumensattelgelenks und des Daumenglieds
- Verletzung im Ellenbereich des Metakarpal-Phalanx-Gelenks des Daumens

#### EIGENSCHAFTEN

- Struktur aus atmungsaktivem 3D-Gewebe
- Dorsale Verstärkungsschienen
- Verschluss mit Umlenkschlaufen und Klettbindern
- Vorgeformte Schienen aus Aluminium für Daumen und Handfläche modellierbar nach ärztlicher Indikation



Aluminium-  
Daumenschiene

#### Artikelnummer

M.P1117 rechts oder links angeben

#### Größen

S M L XL

#### Handgelenkumfang in cm


13/16 16/18 18/20 20/23

#### Länge cm

20 20 20 20

#### Farbe

schwarz

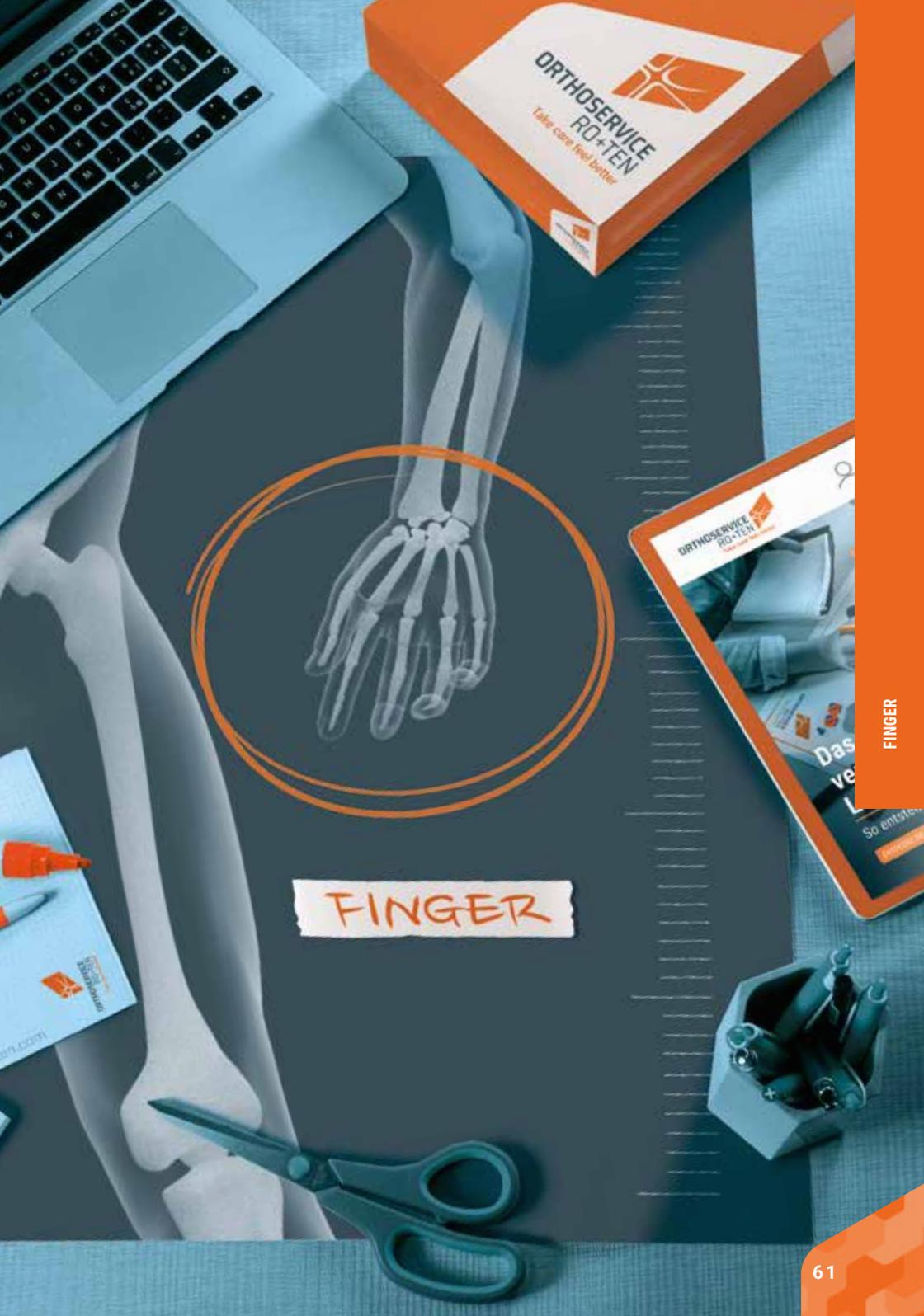

ORTHOSERVICE  
RD+TEN  
*Take care feel better*

ORTHOSERVICE  
RD+TEN  
*Take care feel better*

FINGER

FINGER



# daumfix



Notfallprodukt

## Daumenorthese

HMV-Nr.: 23.07.01.1040

### INDIKATIONEN

- Arthrose des Daumensattelgelenks
- Tendinitis des Daumens
- Tendopathie nach De Quervain
- Distorsion des Metacarpal-Falangeal-Gelenks
- Läsion nach Steiner
- Folgebeschwerden nach Bennet-Fraktur
- Folgebeschwerden von Arthroedese an Trapezium und Mittelhand, sowie nach Daumenchirurgie



### EIGENSCHAFTEN

- Formteil aus Polypropylen mit polierter Oberfläche
- Verschlussband am Handgelenk aus elastischem Klettband
- Schutzhandschuh aus Stretch-Baumwollgewebe, der vor dem Anlegen der Orthese angezogen werden kann
- Thermoverformbar



Schutzhandschuh  
aus Stretch-Baumwollgewebe

#### Artikelnummer

**M.5006** rechts oder links angeben

#### Größen

| S     | M     | L     | XL    |
|-------|-------|-------|-------|
| 13/17 | 17/19 | 19/23 | 23/28 |

#### Handgelenkumfang in cm

#### Farbe

beige



# stax

## Fingerschiene (Fingerendglieder)

Keine HMV-Nr.

### INDIKATIONEN

- Verletzung der Strecksehne
- Segond-Läsion
- Frakturen der Fingerendgelenke
- Distorsionen des distalen Interphalangealgelenks
- Nagelquetschungen
- Postoperative Versorgung nach Eingriffen an den Strecksehnen

### EIGENSCHAFTEN

- Transparente Hartkunststoffschale mit Transpirationslöchern



Artikelnummer

M.2001

Verfügbare Größen  
siehe Abbildung am  
Rand

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7

Farbe

transparent





ORTHOSERVICE  
RD+TEN  
*Take care feel better*

ORTHOSERVICE  
RD+TEN  
*Take care feel better*

HÜFTE

OBERSCHENKEL

HÜFTE/  
OBERSCHENKEL



# symplus

## Beckenorthese für das Iliosakralgelenk

HMV-Nr.: 23.11.01.0009

### INDIKATIONEN

- Schmerzen und Dysfunktionen am Iliosakralgelenk
- Arthrose des Iliosakralgelenks
- Symphysenlockerung (nach Entbindung) – Vorsicht: in diesem Fall die Pelotten nicht benutzen

### EIGENSCHAFTEN

- Innovatives Spannsystem mit Flaschenzug-Technik zur optimalen Stabilisierung und für einfaches Anlegen bei minimalem Kraftaufwand und atmungsaktives Gewebe für sicheren Halt & gleichzeitig trageleicht, mit Bordüre aus hautfreundlichem Material
- Auf der großen Klettverschlussfläche kann der Spanngurt in variablen Druckeinstellungen einfach fixiert werden
- Verstärkter Paravertebralbereich
- Zwei variabel über Klettflächen positionierbare, gepolsterte Pelotten zur gezielten Druckausübung



Innovatives  
Spannsystem mit  
Flaschenzug-  
Technik



Gepolsterte Pelotten  
zur gezielten  
Druckausübung

Artikelnummer

M.T1032

Größen

Regular

Large

Hüftumfang cm

< 89

89/120

Farbe

schwarz



## hipocross 2.0 SET

Hüftgelenkorthese mit einstellbarer Bewegungsbegrenzung in zwei Bewegungsebenen

HMV-Nr.: 23.05.01.1010

### INDIKATIONEN

#### M.91006N:

- Arthroskopie-Nachbehandlung
- Postoperative Rehabilitation (in Funktion zum geforderten Stabilisierungsgrad)
- Konservative Behandlung von Hüftgelenksluxation
- Hüftgelenk-Arthrose
- Coxalgie oder inoperable Gelenkdeformierungen

#### M.91006N + M.91007N:

- Alle Indikationen, bei denen eine Funktionssicherung und/oder Mobilisierung des Hüftgelenks erforderlich ist, wie z.B.:
  - Instabilität des Hüftgelenks
  - Zustand nach Hüftgelenksluxation
  - Lockerung von Hüftendoprothesen
  - Mittelschwere bis schwere Coxarthrose

### EIGENSCHAFTEN

- Struktur aus atmungsaktivem Gewebe AirXTM
- Spiralstäbe für seitlichen und antero-lateralen Halt
- Vorderer Klettverschluss Velcro
- Gurte mit farbig gekennzeichneten Klettverschlüssen
- Kalibrierte elastische Gurte, seitlich überkreuzt, für:
  - Vorbeugung übermäßiger Adduktion
  - Teilweise Begrenzung der Flexion-Extension
- Einsätze aus Kältegel, um Schwellungen vorzubeugen
- Starrer Stab zum Blockieren des Gelenks in neutraler Flexion und Abduktion in den ersten Tagen nach einer Luxation
- **REF.91007N** – Gelenkschiene (teleskopisch) für Hipocross 2.0:
  - Begrenzung der Extension (0° bis 120° in 10°-Schritten)
  - Begrenzung der Flexion (0° bis 120° in 10°-Schritten)
  - Einstellen der Adduktion

Patent: EP3202376 -  
US10548758



#### INKL: M.91007N

Gelenkschiene (teleskopisch)  
für Hipocross 2.0

#### Artikelnummer

#### Größen

Beckenumfang cm

Schenkelumfang cm

Farbe

M.91006N (Hipocross)  
rechts oder links angeben

| S       | M       | L       |
|---------|---------|---------|
| 72/104  | 104/137 | 137/170 |
| 40/58   | 54/74   | 68/90   |
| schwarz |         |         |

#### Artikelnummer

#### Größen

Farbe

M.91007N Gelenkschiene  
(teleskopisch) für Hipocross 2.0

Universal

schwarz

Rechts oder links angeben

Bitte beide Artikelnummern sowie rechts oder links angeben



Erfahren Sie, wie Sie  
Hipocross 2.0 in wenigen  
Schritten anwenden

Schau das  
Video an





## hipo

**Hüftgelenkorthese mit einstellbarer Bewegungsbegrenzung in zwei Bewegungsebenen**

HMV-Nr.: **23.05.01.1004**

### INDIKATIONEN

- Vor und/oder nach chirurgischem Eingriff (Arthroplastik oder Hüftrevision)
- Nicht operierbarer oder nicht ausreichend konsolidierter Oberschenkelhalsbruch
- Kontrolle der Abduktion und der Streckung-Biegung bei Patienten mit potenziellen Gelenkproblemen

### EIGENSCHAFTEN

- Anatomisch geformte Kunststoffkomponenten, perfekt anpassbar
- Modulsystem, welches den Ersatz und die Anpassung der Komponenten erlaubt
- In 4 Größen, als Rechts- oder Linksvariante

| HIPO                       |        |        |         |         |
|----------------------------|--------|--------|---------|---------|
| <b>HÜFTE rechts</b>        |        |        |         |         |
| Größen                     | S      | M      | L       | XL      |
| Artikelnummer              | M.2112 | M.2113 | M.2114  | M.2115  |
| Taillenumfang              | 60/82  | 80/96  | 94/115  | 99/120  |
| Beckenumfang               | 68/90  | 90/110 | 106/126 | 111/131 |
| <b>OBERSCHENKEL rechts</b> |        |        |         |         |
| Größen                     | S      | M      | L       | XL      |
| Artikelnummer              | M.2212 | M.2213 | M.2214  | M.2215  |
| Proximaler Umfang cm       | 44/53  | 48/60  | 57/68   | 62/76   |
| Distaler Umfang cm         | 34/41  | 36/45  | 42/49   | 46/56   |
| <b>HÜFTE links</b>         |        |        |         |         |
| Größen                     | S      | M      | L       | XL      |
| Artikelnummer              | M.2122 | M.2123 | M.2124  | M.2125  |
| Taillenumfang              | 60/82  | 80/96  | 94/115  | 99/120  |
| Beckenumfang               | 68/90  | 90/110 | 106/126 | 111/131 |
| <b>OBERSCHENKEL links</b>  |        |        |         |         |
| Größen                     | S      | M      | L       | XL      |
| Artikelnummer              | M.2222 | M.2223 | M.2224  | M.2225  |
| Proximaler Umfang cm       | 44/53  | 48/60  | 57/68   | 62/76   |
| Distaler Umfang cm         | 34/41  | 36/45  | 42/49   | 46/56   |



## kafo

### Unterschenkelverlängerung für Hüftorthese Hipo

#### INDIKATIONEN

- Kafo ist eine Zusatzvorrichtung, um an der Hüftorthese Hipo kleinste Rotationsbewegungen zu kontrollieren; dies ist notwendig, um eine natürliche Gelenkstellung zu garantieren

#### EIGENSCHAFTEN

- Erhöht den Komfort des Patienten: leichte Materialien, bequeme Polster
- Der einseitige Grundkörper verringert Dekubitus-Komplikationen, besonders bei älteren Patienten
- Erhält die natürliche Stellung des Beines bei der Streckung
- Reduziert die Verrenkungsgefahr
- Optimierte Kontrolle der Beugung/Streckung, der Abduktion und der Einwärts/Auswärts-Drehung der Hüfte



| Optional für Hipo           |          |        |       |     |
|-----------------------------|----------|--------|-------|-----|
| UNTERSCHENKELVERLÄNGERUNG   | STANDARD | LANG   |       |     |
| Artikelnummer               | M.2320   | M.2321 |       |     |
| Beinlänge (Leiste-Ferse) cm | 63/75    | 76/93  |       |     |
| SCHUH                       | S        | M      | L     | XL  |
| Schuhgröße                  | 36/39    | 40/43  | 44/46 | >46 |



## kinesio standard

### Alternatives Gelenk

#### EIGENSCHAFTEN

- Abduktion/Adduktion in 7,5°-Schritten einstellbar
- Flexion/Extension von 0° bis 120° in 15°-Schritten einstellbar



Artikelnummer

M.2303

Größe

Standard

Körpergröße cm

< 180

Farbe

grau



## kinesio long

### Alternatives Gelenk

#### EIGENSCHAFTEN

- Abduktion/Adduktion in 7,5°-Schritten einstellbar
- Flexion/Extension von 0° bis 120° in 15°-Schritten einstellbar



Artikelnummer

M.2304

Größe

Lang

Körpergröße cm

> 180

Farbe

grau



ORTHOSERVICE  
RD+TEN  
*Take care feel better*

ORTHOSERVICE  
RD+TEN  
*Take care feel better*

KNIE

KNIE



# genulastik 04

## Kniegelenkbandage

HMV-Nr.: 05.04.01.0124

### INDIKATIONEN

- Knieschmerzen aufgrund von Kontusionen
- Anfangsstadium der Arthrose
- Femoropatellare Chondropathia, Chondromalacia
- Leichte patellare Instabilität
- Schutz vor Patellaluxation während sportlicher Aktivitäten

### EIGENSCHAFTEN

- Struktur aus dynamischem Gewebe mit differenzierten Kompressionsbereichen
- Körpergerechtes Design
- Silikoneinsatz für die Kniescheibe
- Dünne Stäbe an den Seiten, die die Bandage in Position halten
- Mit Silikon verstärkter oberer Randabschluss für angenehmen Tragekomfort und Widerstandsfähigkeit beim Anziehen



Position der  
Silikonverstärkung



Artikelnummer

M.90104

Größen

Schenkelumfang 14 cm über  
der Mitte der Kniescheibe cm

Wadenumf. 12 cm unter der  
Mitte der Kniescheibe cm

Farbe

| 0     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 35/38 | 38/41 | 41/44 | 44/47 | 47/50 | 50/53 | 53/56 | 56/59 |
| 25/28 | 28/31 | 31/34 | 34/37 | 37/40 | 40/43 | 43/46 | 46/49 |

blau

beidseitig anwendbar



# genuFIT 15A

## Knieführungsorthese ohne Extensions-/Flexionsbegrenzung

HMV-Nr.: 23.04.03.0057

### INDIKATIONEN

- Gonarthrose oder Folgebeschwerden von Distorsionen mit bleibender Instabilität der Seitenbänder (inoperables Knie)

### EIGENSCHAFTEN

- Neues anatomisches, flach anliegendes Design ermöglicht flexible Bewegung und passt sich optimal dem Gelenk an
- Atmungsaktives, hautfreundliches Aer-OS Gewebe
- Neuer, sehr weicher und nahtfreier Kniekehleinsatz aus Soft-X Gewebe für angenehmen Tragekomfort
- Frontöffnung für leichteres Anlegen: innerer Verschluss für Vorfixierung und äußerer Verschluss für endgültige Fixierung
- Optimiertes Verschluss-System: Stabilisierungsurte mit Umlenkschleufe und elastischem Einsatz für optimale Druckeinstellung
- Polyzentrische Gelenkstäbe, extraflach, Flexionsbegrenzung auf 60°, 90°



Polyzentrische Gelenkstäbe



Neuer, sehr weicher und nahtfreier Kniekehleinsatz aus Soft-X Gewebe

|  |                          |          |          |          |           |            |
|--|--------------------------|----------|----------|----------|-----------|------------|
| <b>Artikelnummer</b>                                       | <b>M.G1115A</b> (offene) |          |          |          |           |            |
| <b>Größen</b>  | <b>XS</b>                | <b>S</b> | <b>M</b> | <b>L</b> | <b>XL</b> | <b>XXL</b> |
| <b>Umfang Oberschenkel 15 cm mittig über Patella in cm</b> | 33/39                    | 39/45    | 45/52    | 52/58    | 58/66     | 66/75      |
| <b>Länge cm</b>  | 34                       | 34       | 34       | 34       | 34        | 34         |
| <b>Farbe</b>   | schwarz                  |          |          |          |           |            |

beidseitig anwendbar



# genuSKILL 28A

## Knieführungsorthese mit Extensions-/Flexionsbegrenzung

HMV-Nr.: **23.04.03.2034**

### INDIKATIONEN

- Funktionelle Behandlung von Zerrungen I. und II. Grades Innen- oder Außenbandes (Ligamentum collaterale mediale laterale)
- Chronische latero-mediale Instabilität
- Femoropatellararthrose
- Arthrosebedingte Instabilität (inoperables Knie)

### EIGENSCHAFTEN

- Aufbau aus atmungsaktivem und widerstandsfähigem BreathSkill Gewebe
- Rückseite aus CompresSkill:
  - elastisches Mehrfaser-Kompressionsgewebe
  - extraflaches, superbequemes Profil (Kniebeuge)
  - optimale Anpassungsfähigkeit am Bein
- Polyzentrisches KLICKKLACK-Gelenk, superflach und leicht verstellbar mit Keilen und OHNE Werkzeuge
  - Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
  - Flexion: 45°, 60°, 75°, 90°
  - Blockierung: 0°, 10°, 20°, 30°

Patent: **EP3492050**



Artikelnummer

Größen

Umfang Oberschenkel 15 cm  
mittig über Patella in cm

Länge cm

Farbe

**M.33128A** (offene)

| XS    | S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 33/39 | 39/45 | 45/52 | 52/58 | 58/66 | 66/75 |
| 41    | 41    | 41    | 41    | 41    | 41    |

grau

beidseitig anwendbar



# genuFIT 15

## Knieführungsorthese ohne Extensions-/Flexionsbegrenzung

HMV-Nr.: 23.04.03.0058

### INDIKATIONEN

- Gonarthrose oder Folgebeschwerden von Distorsionen mit bleibender Instabilität der Seitenbänder (inoperables Knie)
- Leichte lateromediale Instabilität der Patella
- Femoropatellare Arthrose

### EIGENSCHAFTEN

- Anatomisches flach anliegendes Design ermöglicht flexible Bewegung und passt sich optimal dem Gelenk an
- Atmungsaktives, hautfreundliches Aer-OS Gewebe
- Weicher und nahtfreier Kniekehleinsatz aus Soft-X Gewebe für angenehmen Tragekomfort
- Öffnung für Patella mit Schaumstoff-Stabilisierung
- Optimiertes Verschluss-System: Stabilisierungsgurte mit Umlenkschlaufe und elastischem Einsatz für optimale Druckeinstellung
- Polyzentrische Gelenkstäbe, extraflach, Flexionsbegrenzung auf 60°, 90°



Neuer, sehr weicher und nahtfreier Kniekehleinsatz aus Soft-X Gewebe



Polyzentrische Gelenkstäbe

Artikelnummer

M.G1115

Größen

| XS    | S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 33/39 | 39/45 | 45/52 | 52/58 | 58/66 | 66/75 |

Umfang Oberschenkel 15 cm mittig über Patella in cm

Länge cm

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
|----|----|----|----|----|----|

Farbe

schwarz

beidseitig anwendbar



## genuFIT 27A

### Knieführungshese mit Extensions-/Flexionsbegrenzung

HMV-Nr.: 23.04.03.2020

#### INDIKATIONEN

- Funktionelle Behandlung von Zerrungen I. und II. Grades des Innen- oder Außenbandes (Ligamentum collaterale mediale/laterale)
- Chronische latero-mediale Instabilität
- Femoropatellararthrose
- Arthrosebedingte Instabilität (inoperables Knie)

#### EIGENSCHAFTEN

- Flach anliegendes Design ermöglicht flexible Bewegung und passt sich optimal dem Gelenk an
- Weicher und nahtfreier Kniekehleinsatz aus Soft-X Gewebe für angenehmen Tragekomfort
- Neue, weiche und elastische Bordüre
- Neue Frontöffnung für leichteres Anlegen: Innerer Verschluss für Vorfixierung und äußerer Verschluss für endgültige Fixierung. Patella-Aussparung
- Atmungsaktives, hautfreundliches Aer-OS Gewebe und Verschlussgurte aus Klett
- Sehr flaches, polyzentrisches Gelenk, einstellbar ohne zusätzliche Werkzeuge - einfach & variabel mit Keilen:
  - Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
  - Flexion: 45°, 60°, 75°, 90°
  - Blockierung: 0°, 10°, 20°, 30°
- Dehnungs-Einnäher hinten am proximalen Teil des Oberschenkels



Sehr flaches,  
polyzentrisches  
Gelenk, einstellbar  
ohne zusätzliche  
Werkzeuge - einfach  
& variabel mit Keilen

#### Artikelnummer

#### Größen

Umfang Oberschenkel 15 cm  
mittig über Patella in cm

Länge cm

Farbe

#### M.G1127A (offene)

| XS    | S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 33/39 | 39/45 | 45/52 | 52/58 | 58/66 | 66/75 |
| 41    | 41    | 41    | 41    | 41    | 41    |

schwarz

beidseitig anwendbar



# genuFIT 50A

## Knieführungsorthese mit Extensions-/Flexionsbegrenzung

HMV-Nr.: 23.04.03.2031

### INDIKATIONEN

- Postoperative Versorgung, bei der ein Schutz der Flexion und Extension des Knies erforderlich ist (Bandrekonstruktion, Transposition der vorderen Tibiaapophyse, Fraktur des distalen Drittels des Oberschenkels, Frakturen des proximalen Drittels des Schienbeins, Frakturen der Kniescheibe, Sehnenverletzungen des Streckapparats)
- Posttraumatische Versorgung von Kniedistorsionen
- Funktionelle Behandlung von Zerrungen I. und II. Grades des Innen- oder Außenbandes (Ligamentum collaterale mediale/laterale)
- Chronische latero-mediale Instabilität
- Arthrosebedingte Instabilität (inoperables Knie)

### EIGENSCHAFTEN

- Länge der Kniestütze: 50cm
- Aus atmungsaktivem Aer-OS, Verschlussgurte mit Klettband
- Praktische, sicher einrastende Verschlusschnallen
- Extrem flacher polyzentrischer Gelenkeinsatz, mit Keilen einfach variabel einstellbar:
  1. Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
  2. Flexion: 45°, 60°, 75°, 90°
  3. Ruhigstellung: 0°, 10°, 20°, 30°
- Mit Patella-Aussparung
- Weicher, elastischer Rand
- Öffnung an der Kniekehle
- Extraflaches anatomisches Design für hervorragende Beweglichkeit und optimaler Anpassung an das Gelenk



Durch die Haken an den seitlichen Stäben werden die Gurte in der korrekten Position gehalten

Artikelnummer

Größen

Umfang Oberschenkel 15 cm mittig über Patella in cm

Länge cm

Farbe

M.G1150A (offene)

| XS    | S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 33/39 | 39/45 | 45/52 | 52/58 | 58/66 | 66/75 |
| 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    |

schwarz

beidseitig anwendbar



# genuFIT 16

## Knierorthese zur Beeinflussung des Patellagleitweges

HMV-Nr.: **23.04.05.0013**

### INDIKATIONEN

- Lateral-mediale Instabilität des Kniees
- Femoropatellare Arthrose
- Gonarthrose

### EIGENSCHAFTEN

- Atmungsaktives, hautfreundliches Aer-OS Gewebe
- Öffnung für Patella mit lateralem, J-förmigem Stabilisator aus Schaumstoff
- Spiralförmige Stäbe, lateral und medial
- Klettverschluss mit Umlenkschleufe (kann bei Bedarf gekürzt werden)
- Kniekehleinsatz aus Soft-X Gewebe für angenehmen Tragekomfort



Artikelnummer

**M.G1116** rechts oder links angeben

Größen

| XS    | S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 33/39 | 39/45 | 45/52 | 52/58 | 58/66 | 66/75 |

Umfang Oberschenkel 15 cm mittig über Patella in cm

33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75

Länge cm

34 34 34 34 34 34

Farbe

schwarz

**RECHTS** = für mediale Kniegelenksarthrose am rechten Knie (rechtes Knie Varus) oder für laterale Kniegelenksarthrose am linken Knie (linkes Knie Valgus)

**LINKS** = für mediale Kniegelenksarthrose am linken Knie (linkes Knie Varus) oder für laterale Kniegelenksarthrose am rechten Knie (rechtes Knie Valgus)



Notfallprodukt



# immok 0°

## Knieorthese zur Immobilisierung, bei 0°

HMV-Nr.: 23.04.01.0039

### INDIKATIONEN

- Ruhigstellung des Knies in Extension (postoperativ oder posttraumatisch)

### EIGENSCHAFTEN

- Aus zweilagigem, weichem Schaumstoff
- Innen gefüttert mit Frottee
- Außen- und innenseitige, sowie hintere stabile, aber formbare Leichtmetallschienen
- Innen- und außenseitige verstellbare Stützplatten
- Öffnung für die Patella



Öffnung für die Patella

|                          |               |               |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b>     | <b>M.8104</b> | <b>M.8105</b> | <b>M.8106</b> | <b>M.8107</b> |
| <b>Ruhigstellung bei</b> | 0°            | 0°            | 0°            | 0°            |
| <b>Länge in cm</b>       | 40            | 50            | 60            | 70            |
| <b>Farbe</b>             | schwarz       |               |               |               |

beidseitig anwendbar



# immok 20°



Notfallprodukt

**Knieorthesen zur Immobilisierung,  
gebeugt bei 20°**

HMV-Nr.: 23.04.01.1027

**INDIKATIONEN**

- Ruhigstellung des Knies in 20° Flexion (postoperativ oder posttraumatisch)

**EIGENSCHAFTEN**

- Aus zweilagigem, weichem Schaumstoff
- Innen gefüttert mit Frottee
- Außen- und innenseitige, sowie hintere stabile, aber formbare Leichtmetallschienen
- Innen- und außenseitige verstellbare Stützplatten
- Öffnung für die Patella
- Waschbar



Öffnung für die Patella



Herausnehmbares Polster zum Stabilisieren der Kniekehle falls erforderlich

| Artikelnummer     | M.8104/F | M.8105/F | M.8106/F | M.8107/F |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| Ruhigstellung bei | 20°      | 20°      | 20°      | 20°      |
| Länge in cm       | 40       | 50       | 60       | 70       |
| Farbe             | schwarz  |          |          |          |

beidseitig anwendbar



NEU

# go up PRO

## Knieorthese zur Mobilisierung mit Teleskopschienen und offenem Design

HMV-Nr.: 23.04.02.0

### INDIKATIONEN

- Postoperative Behandlung, die eine Begrenzung von Flexion Extension des Knies erfordert (Bandrekonstruktion, Transposition der Tibia-Apophyse, Frakturen im distalen Drittels des Femurs, Frakturen im proximalen Drittels der Tibia, Frakturen der Patella, Verletzungen der Streckmuskel-Sehnen)
- Posttraumatische Phase nach Distorsionen des Knies
- Varisierende oder valgisierende Osteotomien

### EIGENSCHAFTEN

- Seitliche Gelenkschienen aus leichter Aluminiumlegierung. Teleskopierbare Längenverstellung über einfache Drucktasten auf dem Gelenkgehäuse
- Abnehmbare und waschbare Kondylenschutzpolster
- MTP-Polster, um das Verrutschen der Orthese einzuschränken und das Bein vor direktem Kontakt mit den Schienen zu schützen; sie sind nur außen gefüttert und können für eine perfekte Anpassung an den Beinumfang zugeschnitten werden.



Gelenk intuitiv und sicher einstellbar:

- Flexion: von -10° bis +120° in 10°-Schritten
- Extension: von -10° bis +90° in 10°-Schritten
- Möglichkeit des schnellen Verriegelns des Gelenks mit speziellem Knopf, von -10° bis +90° in 10°-Schritten

Artikelnummer

REF.24046

Größen

Einheitsgröße

Länge der Schienen cm

50-65

Farbe

grau

beidseitig anwendbar



# pluspoint FAST


**Rahmenorthese zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks mit Extensions-/Flexionsbegrenzung**

HMV-Nr.: **23.04.03.3082**

### INDIKATIONEN

- Instabilitäten und Rupturen des LCA, LCP, LCM, LCL oder kombinierte Bandinstabilitäten
- Komplexe Knieinstabilitäten, traumatisch oder degenerativ
- Prä-/Postoperative Behandlung, rehabilitativ oder konservativ, der genannten Verletzungen

Patent: **EP3492050**

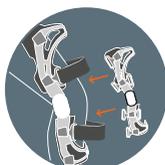

Polyzentrisches KLICK KLACK-Gelenk, superflach und leicht mit Keilen verstellbar,

OHNE Werkzeuge:

- Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
- Flexion: 45°, 60°, 75°, 90°
- Blockierung: 0, 10°, 20°, 30°

### EIGENSCHAFTEN

#### Rahmen:

- Leicht und stabil, aus spezieller Aluminiumlegierung, verformbar (vereinfachtes Modellieren der Fixierungen für Oberschenkel und Tibia)
- Anatomisches Design, das sich optimal an die Gliedmaßen anpasst
- Einfaches, ventrales Auflegen.
- Auskleidung innen aus hypoallergenem, rutschfestem Gewebe mit Multi-Grip; Fixiert mit flachen Druckknöpfen für ein sicheres Positionieren
- Extra dicke Polsterung seitlich der Tibia für optimalen Komfort
- Vormontiertes mediales anatomisch geformtes Kondylenpolster für optimale Stabilität
- Zwei Kondylenpolster-Sets unterschiedlicher Dicke im Lieferumfang enthalten

#### Verschlussystem:

- Hebelverschlüsse mit Sicherheitsknopf, zum Anlegen der Orthese ohne Öffnen der Klettverschlüsse (die nur bei der Erstanwendung justiert werden)
- Polsterung der Gurte aus MTP-Schaumstoff mit Überzug Velours für ein angenehmes Tragen direkt auf der Haut

Artikelnummer

**M. 22040** rechts oder links angeben

Größen

| S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 39/47 | 47/53 | 53/60 | 60/67 | 67/75 |
| 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |

Umfang Oberschenkel 15 cm über der Patella

Länge cm

Farbe

dunkelgrau



# pluspoint 4

**Rahmenorthese zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks mit Extensions-/Flexionsbegrenzung**

HMV-Nr.: **23.04.03.3074**

**INDIKATIONEN**

- Instabilitäten und Rupturen des LCA, LCP, LCM, LCL\* oder kombinierte Bandinstabilitäten
- Komplexe Knieinstabilitäten, traumatisch oder degenerativ
- Prä/Postoperative Behandlung, rehabilitativ oder konservativ, der genannten Verletzungen

Patent: **EP3492050**



Polyzentrisches KLICK KLACK-Gelenk, superflach und leicht mit Keilen verstellbar, OHNE Werkzeuge:

- Extension: 0°,10°,20°,30°,40°
- Flexion: 45°,60°,75°,90°
- Blockierung: 0,10°,20°,30°

**EIGENSCHAFTEN**

- Anatomisches Design, passt sich optimal dem Kniegelenk an
- Innovativer Rahmen aus Aluminiumspeziallegierung, leicht und stabil, einfach verformbar durch den Techniker, mattschwarz hartlackiert
- Gurtführungen aus speziellem, biegbarem Polymer mit Anti-Rotationssystem erleichtern das Anlegen und passen sich an das Bein an, einzeln abnehmbar
- Zweigeteilte Verschlussbänder mit Klettband für einfaches und optimales Anlegen. Bei Bedarf einzeln entfernbar
- Ein mediales, anatomisch vorgeformtes Kondylenpolster, vormontiert, für höchsten Tragekomfort sowie optimale Fixierung
- Zwei unterschiedlich starke und leicht austauschbare Kondylenpolster-Sets zur einfachen Anpassung (z. B. nach Rückgang der Schwellung im Kniegelenk)
- Innenpolster fixiert mit flachen, verschweißten Druckknöpfen für sichere Positionierung. Abnehmbar, z. B. für die Reinigung. Rutschhemmender hautfreundlicher Multi-Grip-Überzug

\* LCA: ligamentum cruciatum anterius  
LCP: ligamentum cruciatum pos terius  
LCM: ligamentum collaterale tibiale oder mediale  
LCL: ligamentum collaterale fibulare oder laterale

**Artikelnummer**  
**Größen**  
**Umfang Oberschenkel 15 cm mittig über Patella in cm**  
**Größen Umfang Knie in cm**  
**Länge cm**  
**Farbe**

**M.33040** rechts oder links angeben

| S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 39/47 | 47/53 | 53/60 | 60/67 | 67/75 |
| 32/35 | 35/38 | 38/42 | 42/47 | 47/53 |
| 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |

schwarz



# pluspoint 3

**Rahmenorthese zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks mit Extensions-/Flexionsbegrenzung**

HMV-Nr.: **23.04.03.3058**

### INDIKATIONEN

- Instabilitäten und Rupturen des LCA, LCP, LCM, LCL\* oder kombinierte Bandinstabilitäten
- Komplexe Knieinstabilitäten, traumatisch oder degenerativ
- Prä/Postoperative Behandlung, rehabilitativ oder konservativ, der genannten Verletzungen

### EIGENSCHAFTEN

- Anatomisches Design, passt sich optimal dem Kniegelenk an
- Innovativer Rahmen aus Aluminiumspeziallegierung, leicht und stabil, einfach verformbar
- Gurtführungen aus biegbarem Polymer mit Anti-Rotationssystem erleichtern das Anlegen
- Sehr flaches polyzentrisches Gelenk, einfach variabel mit Keilen einstellbar
- Ruhigstellung bei 0°, 10°, 20° und 30°
- Regulierbare Flexionseinstellung durch Keile (0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°)
- Regulierbare Extensionseinstellung durch Keile (0°, 10°, 20°, 30°, 40°)
- Ein mediales, anatomisch vorgeformtes Kondylenpolster, vormontiert, für guten Tragekomfort sowie optimale Fixierung
- Zwei unterschiedlich starke und leicht austauschbare Kondylenpolster-Sets zur einfachen Anpassung (z. B. nach Rückgang der Schwellung im Kniegelenk)
- Innenpolster fixiert mit flachen, verschweißten Druckknöpfen für sichere Positionierung. Abnehmbar, z. B. für die Reinigung

\* LCA: ligamentum cruciatum anterior  
LCP: ligamentum cruciatum pos terius  
LCM: ligamentum collaterale tibiale oder mediale  
LCL: ligamentum collaterale fibulare oder laterale



Sehr flaches polyzentrisches Gelenk, einfach variabel mit Keilen einstellbar

Artikelnummer

Größen

Umfang Oberschenkel 15 cm mittig über Patella in cm

Länge cm

Farbe

**M.9540 (long) rechts oder links und Farbe angeben**

| XS      | S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 34/39   | 39/47 | 47/53 | 53/60 | 60/67 | 67/75 |
| 40      | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
| schwarz |       |       |       |       |       |



# pluspoint 3 short

**Rahmenorthese zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks mit Extensions-/Flexionsbegrenzung**

HMV-Nr.: **23.04.03.3058**

### INDIKATIONEN

- Instabilitäten und Rupturen des LCA, LCP, LCM, LCL\* oder kombinierte Bandinstabilitäten
- Komplexe Knieinstabilitäten, traumatisch oder degenerativ
- Prä-/Postoperative Behandlung, rehabilitativ oder konservativ, der genannten Verletzungen

### EIGENSCHAFTEN

- Anatomisches Design, passt sich optimal dem Kniegelenk an
- Innovativer Rahmen aus Aluminiumspeziallegierung, leicht und stabil, einfach verformbar
- Gurtführungen aus biegbarem Polymer mit Anti-Rotationssystem erleichtern das Anlegen
- Sehr flaches polyzentrisches Gelenk, einfach variabel mit Keilen einstellbar
- Ruhigstellung bei 0°, 10°, 20° und 30°
- Regulierbare Flexionseinstellung durch Keile (0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°)
- Regulierbare Extensionseinstellung durch Keile (0°, 10°, 20°, 30°, 40°)
- Ein mediales, anatomisch vorgeformtes Kondylenpolster, vormontiert, für guten Tragekomfort sowie optimale Fixierung
- Zwei unterschiedlich starke und leicht austauschbare Kondylenpolster-Sets zur einfachen Anpassung (z. B. nach Rückgang der Schwellung im Kniegelenk)

- \* LCA: ligamentum cruciatum anterius
- LCP: ligamentum cruciatum pos terius
- LCM: ligamentum collaterale tibiale oder mediale
- LCL: ligamentum collaterale fibulare oder laterale



Sehr flaches polyzentrisches Gelenk, einfach variabel mit Keilen einstellbar

\* LCA: ligamentum cruciatum anterius  
LCP: ligamentum cruciatum pos terius  
LCM: ligamentum collaterale tibiale oder mediale  
LCL: ligamentum collaterale fibulare oder laterale

#### Artikelnummer

#### Größen

Umfang Oberschenkel 15 cm mittig über Patella in cm

Länge cm

Farbe

**M.9530 (short)** rechts oder links angeben

| S       | M     | L     | XL    | XXL   |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 39/47   | 47/53 | 53/60 | 60/67 | 67/75 |
| 36,5    | 36,5  | 36,5  | 36,5  | 36,5  |
| schwarz |       |       |       |       |



## genufeeel oa

**Knieorthese zur Entlastung und Führung**

HMV-Nr.: 23.04.04.1034

### INDIKATIONEN

- Moderate Einkompartment-Kniegelenksarthrose
- Postoperative Unterstützung für Knorpel und Meniskus

### EIGENSCHAFTEN

- Elastisches atmungsaktives Gewebe im modernen Design
- Patentiertes Verschluss- und Spannsystem
- Komplett zu öffnen für leichtes Anlegen
- Einfache Regulierung der Korrektur durch Markierungen an den Gurten
- Druckentlastungsring mit Gelpolstern und Polymerstäben für mehr Tragekomfort
- Wirksames & effizientes Drei-Punkt-System - beim Stehen wird das Gurtsystem gespannt, beim Sitzen verringert sich der Druck
- Gelenkschiene mit optionaler Begrenzung der Flexion (20°, 40°) und Extension (0°, 10°)

Patent: EU, US, CN pending



Schiene aus Stahl auf einer Seite mit der Möglichkeit zur Begrenzung der Flexion (20°, 40°) und Extension (0°, 10°)

#### Artikelnummer

REF.24014R - REF.24014L

#### Größe

| XS    | S     | M     | L     | XL    | XXL   | 3XL   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 33/39 | 39/45 | 45/52 | 52/58 | 58/66 | 67/74 | 74/81 |

Umfang 15 cm über der Kniemitte cm

Höhe cm

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|----|----|----|----|----|----|----|

Farbe

dunkelgrau

rechts oder links angeben

**RECHTS** = für mediale Kniegelenksarthrose am rechten Knie (rechtes Knie Varus) oder für laterale Kniegelenksarthrose am linken Knie (linkes Knie Valgus)

**LINKS** = für mediale Kniegelenksarthrose am linken Knie (linkes Knie Varus) oder für laterale Kniegelenksarthrose am rechten Knie (rechtes Knie Valgus)



# ORTHO-A

## Knieorthese zur Entlastung und Führung

HMV-Nr.: 23.04.04.1013

### INDIKATIONEN

- Moderate Einkompartment-Kniegelenksarthrose
- Postoperative Versorgung nach Knorpeloperation, Knorpelreparatur, Meniskusrefixation

### EIGENSCHAFTEN

- Leichte Struktur aus Aluminium und Kunststoff
- Einseitiger Stab für besseren Sitz und optimale Wirkung
- Doppelgelenk zur Einstellung der lateralen/medialen Schubkraft
- Verschluss-Schnallen mit Sicherheits-Druckknopf zum Anlegen auch ohne Klettverschluss (der nur beim ersten Anlegen justiert wird)
- 4 gepolsterte und nummerierte Zugbänder um das Schließen zu vereinfachen
- Schaumstoffpolster weich auf der Haut, hypoallergen und rutschhemmend
- Zusätzliche Kondylen-Polster



Keile zur Begrenzung der Extension auf 5°, 10°, 15°, 20° oder 25° und der Flexion auf 45°, 60°, 75° oder 90°

Artikelnummer

M.91014

Größen

Universal

Farbe

grau

Rechts oder links angeben



### So funktionieren unsere Knieorthesen bei Gonarthrose:

- **RECHTS** =  
für mediale Kniegelenksarthrose am rechten Knie (rechtes Knie Varus) oder für laterale Kniegelenksarthrose am linken Knie (linkes Knie Valgus)
- **LINKS** =  
für mediale Kniegelenksarthrose am linken Knie (linkes Knie Varus) oder für laterale Kniegelenksarthrose am rechten Knie (rechtes Knie Valgus)







ORTHOSERVICE  
RD+TEN  
*Take care feel better*

ORTHOSERVICE  
RD+TEN  
*Take care feel better*

UNTERSCHENKEL

SPRUNGGGELENK

UNTERSCHENKEL  
SPRUNGGGELENK



## malleolastik37

### Sprunggelenkbandage

HMV-Nr.: 05.02.01.0080

#### INDIKATIONEN

- Tibiotarsal-Verstauchungen I. Grades
- Tendinopathien an Spann- und Peronalsehnen

#### EIGENSCHAFTEN

- Struktur aus dynamischem Gewebe mit differenzierten Kompressionsbereichen
- Körpergerechtes Design
- Silikoneinsatz für den Fußknöchel
- Mit Silikon verstärkter oberer Randabschluss für mehr Komfort und Widerstandsfähigkeit beim Anziehen



Position der  
Silikonverstärkung

Artikelnummer

M.90137

Größen

| 0     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 15/17 | 17/19 | 19/21 | 21/23 | 23/25 | 25/27 | 27/29 |

Knöchelumfang cm

Farbe

blau

beidseitig anwendbar

NEU



## malleoRAPID

**Sprunggelenkorthese zur Stabilisierung des oberen und unteren Sprunggelenks**

HMV-Nr.: 23.02.02.1050

### INDIKATIONEN

- Konservative Behandlung nach Distorsionen Grad II
- Akute Tendinopathien
- Postoperative Rehabilitation
- Unterstützt die Wiederaufnahme von sportlichen Aktivitäten nach Distorsionen Grad II und III
- Chronische Gelenkschmerzen bedingt durch Sprunggelenksarthrose

### EIGENSCHAFTEN

- Anatomisch geformt mit flachem Profil, um in die meisten Schuhe zu passen
- Grundgewebe aus dreidimensionalem Mesh, um Festigkeit und maximale Atmungsaktivität zu garantieren
- Lateral und medial verstärktes Gewebe zum Schutz vor Kontakt mit den Verstärkungsstäben
- Medial und lateral angebrachte runde Stäbe aus Stahl zum Stabilisieren, individuell anpassbar
- Öffnung hinten, mit Klettverschluss für ein einfaches Anlegen
- System zum Regulieren der Weite mit Kordel und Stopper
- Elastische Zuggurte zum Überkreuzen auf dem Spann für maximale Stabilität, mit Klettverschluss



Artikelnummer

REF.24081

Größen

| 0     | 1     | 2     | 3     |
|-------|-------|-------|-------|
| 16/19 | 19/22 | 22/26 | 26/30 |

Umfang Knöchel cm

Farbe

grau mit Hexagondesign

beidseitig anwendbar



## malleostrong PRO

**Sprunggelenkorthese  
zur Stabilisierung  
in mindestens zwei Ebenen**



Notfallprodukt

HMV-Nr.: 23.02.02.2008

### INDIKATIONEN

- Distorsion II. und III. Grades
- Postoperative funktionale Genesung
- Rehabilitation bei Malleolarfraktur
- Chronische Instabilität des Knöchels und nach Sportverletzungen

### EIGENSCHAFTEN

- Dünne Struktur aus Breath-o-prene®
- In die Stütze eingesetzte seitliche Kunststoffschaalen, die mit weichen MTP-Polstern gefüttert sind
- Zusätzliche hintere Polster erhöhen den Komfort
- Elastisches Band zum Verschließen des hinteren Teils der Stütze
- Zirkuläres, stabilisierendes Schließband (nach Maß verkürzbar)



Spanngurte im Rücken- und Bauchbereich, aus tragfreundlichem Material

#### Artikelnummer

**M.A1028** rechts oder links angeben

#### Größen

| XS    | S     | M     | L     | XL   |
|-------|-------|-------|-------|------|
| 30/34 | 35/38 | 39/42 | 43/47 | > 47 |

#### Schuhgröße

#### Farbe

schwarz



# airstrong

## Sprunggelenkorthese zur Stabilisierung in einer Ebene

HMV-Nr.: 23.02.02.0053

### INDIKATIONEN

- Distorsionstraumata 2. und 3. Grades
- Funktionale Genesungsphase nach chirurgischem Eingriff
- Funktionale Genesung nach Knöchelbrüchen
- Chronische Instabilität des Knöchels und nach Sportverletzungen

### EIGENSCHAFTEN

- Orthese zur Stabilisierung des Sprunggelenks mit Begrenzung von Pro- und Supination
- Mit Luft aufblasbare Polster
- Zweischalige, anatomisch geformte Bandage aus leichtem und strapazierfähigem Material
- Aufgrund der Klettbänder leicht auf die Breite der Ferse anpassbar
- Leichtes Anlegen dank der Komplettöffnung



Mit Luft aufblasbare Polster



M.500/P  
Pumpe im Lieferumfang enthalten

Artikelnummer

M.A1029

Größen

universal

Farbe

weiß

beidseitig anwendbar

M.500/P Pumpe im Lieferumfang enthalten



## malleonite

### Fußlagerungsschiene für die Nacht

HMV-Nr.: 23.03.01.0017

#### INDIKATIONEN

- Plantarfasziitis
- Achilles Tendinopathie
- Instabilität des Fusses
- Schmerzen beim Aufwachen
- Fersenschmerz
- Achillodynie
- Zustand nach Apoplex
- Infantile Cerebralparese
- Verkürzung der plantaren Faszie
- Fersensporn
- Achillessehnenentzündungen und -schwächen
- Metatarsalgie
- Spitzfußstellungen und Fußgelenkskontrakturen

#### EIGENSCHAFTEN

- Kunststoffschale mit Gelenken, individuell anpassbar, Plantarflexion justierbar
- Weiche, bequeme Polsterung
- Velcro® - Klettverschluss an den Waden- und Fußgurten, bequem gepolstert

|               |         |       |
|---------------|---------|-------|
| Artikelnummer | M.90062 |       |
| Größen        | S/M     | L/XL  |
| Schuhgröße    | 36/42   | 43/48 |
| Farbe         | schwarz |       |

beidseitig anwendbar



## carbonafoventral

### Dynamische Fußheberorthese aus Karbonfaser

HMV-Nr.: 23.03.02.6020

#### INDIKATIONEN

- Peroneus-Parese
- Poliomyelitis
- Lumbaler Wurzelschaden
- Schlaganfall
- Spitzfuß
- Quadrizeps Schwäche
- Knieinstabilität
- Teilfuß-Amputation
- Hallux-Amputation

#### KONTRAINDIKATIONEN

- Die Anwendung dieser Orthese wird nur empfohlen, wenn dokumentiert ist, dass die Fraktur stabil ist und akzeptable Grenzen in Bezug auf Achs- und Drehfehlstellung nicht überschritten werden

#### EIGENSCHAFTEN

- Struktur aus verstärkter Karbonfaser für hervorragenden Halt
- Dünne Sohle aus Karbonfaser, anpassbar an unterschiedliches Schuhwerk
- Vorderschale aus Polymer (thermoformbar), verstellbar in der Höhe
- Velcro®-Klettverschlüsse an der Wade, mit Feststellung
- Leicht

#### Artikelnummer

#### Größen

#### Länge Fußplatte cm

#### Schuhgröße

#### Farbe

M.KAFOV rechts oder links angeben

| S     | M     | L     | XL    |
|-------|-------|-------|-------|
| 22/24 | 24/26 | 26/29 | 29/31 |
| 39/41 | 41/43 | 43/46 | 43/46 |

schwarz



## carbon afo

### Dynamische Fußheberorthese aus Karbonfaser

HMV-Nr.: 23.03.02.6017

#### INDIKATIONEN

- Fußheberschwäche
- Schlaganfall
- Multiple Sklerose
- Neurologische Störungen
- Vorderfußamputation

#### KONTRAINDIKATIONEN

- Makroskopische Deformation des Fußes oder des Knöchels
- Akutes Ödem
- Leichte bis starke spastische Lähmung
- Muskelkontraktur im vorderen und hintere Schienbeinbereich, die mit der Orthese nicht einfach behoben werden kann

#### EIGENSCHAFTEN

- Widerstandsfähige, elastische Spiralstruktur mit entsprechender Vorspannung für konstanten Halt des Fußes
- Struktur aus verstärkter Karbonfaser für optimalen Halt. Sohle aus dünner Karbonfaser, passend für unterschiedliche Schuhe
- Leicht
- Klettverschluss mit Feststellring an der Wade
- Wadenspanne ausgekleidet mit weicher, technischer MTP-Polsterung
- Waschbar

#### Artikelnummer

#### Größen

#### Höhe in cm

#### Schuhgröße

#### Farbe

M.KTAFO rechts oder links angeben

| S       | M     | L     |
|---------|-------|-------|
| 36      | 39    | 42    |
| 33/38   | 38/43 | 43/48 |
| schwarz |       |       |



## afolight

### Peroneusorthese

HMV-Nr.: 23.03.02.5016

#### INDIKATIONEN

- Fußheberschwäche (Peroneuslähmung)
- Spastischer Spitzfuß leichter bis mittelstarker Ausprägung

#### EIGENSCHAFTEN

- Grundkörper aus Polypropylen mit abgerundeten Rändern
- Weiche Stützplatte am Schienbein und an der Wade (MTP-Polsterung, beidseitig mit leichtem Velours überzogen)
- Verschluss durch Klettband an der Wadenschale
- Warm verformbar
- Klettverschluss über dem Fußrücken



#### Artikelnummer

**M.9050** rechts oder links angeben

#### Größen

**S**      **M**      **L**      **XL**

#### Höhe in cm

28      29      34      39

#### Schuhgröße

35/39      40/43      41/44      > 44

#### Farbe

weiß



Polyoxymethylen  
(Acetal Resin),  
nicht-hygrokopisch,  
formstabil,  
robust und elastisch

# afoextrastrong

## Peroneusorthese extra stark

HMV-Nr.: 23.03.02.5017

### INDIKATIONEN

- Fußheberschwäche (Peroneuslähmung)
- Spastischer Spitzfuß leichter bis mittelstarker Ausprägung

### EIGENSCHAFTEN

- Grundkörper aus formstabilem, robustem und elastischem Polyoxymethylen (Acetal Resin)
- Verschluss durch Klettband an der Wadenschale
- Weiche Stützplatte am Schienbein und an der Wade (MTP-Polsterung, beidseitig mit leichtem Velours überzogen)
- Klettverschluss über dem Fußrücken

### Artikelnummer

### Größen

### Höhe in cm

### Schuhgröße

### Farbe

**M.9051** rechts oder links angeben

| S     | M     | L     | XL   |
|-------|-------|-------|------|
| 28    | 29    | 34    | 39   |
| 35/39 | 40/43 | 41/44 | > 44 |

hellblau



Notfallprodukt

## airstep walker

### Unterschenkel-Fußorthese zur Immobilisierung

HMV-Nr.: 23.06.01.0066

HMV-Nr.: 23.06.01.1018 mit Keilen

#### INDIKATIONEN

- Konservative Behandlung von Knöchelfrakturen
- Distorsionen III. Grades
- Postoperative Phase nach Osteosynthese von Knöchelfrakturen
- Stabilisierung von Bänderverletzungen des Sprunggelenks und Achillessehnennaht
- Stabile Fuß-, Knöchel-, Tibia- und Fibulafrakturen distal

#### KONTRAINDIKATIONEN

- Die Anwendung dieser Orthese wird nur empfohlen, wenn dokumentiert ist, dass die Fraktur stabil ist und akzeptable Grenzen in Bezug auf Achs- und Drehfehlstellung nicht überschritten werden

#### EIGENSCHAFTEN

- Verstärkungsschalen vorne und hinten für eine bessere Stabilität
- Aufblasbares Luftpolster für optimalen Tragekomfort und einen besseren Halt
- Grundkörper aus leichtem, widerstandsfähigem Kunststoff



#### OPTION:

**M.501**

Fersenkeile, rechts und links angeben

Hilfsmittelnummer:

23.06.01.1018



#### OPTION:

**M.505**

Diabetic Set, beidseitig anwendbar



**M.500/P**

Pumpe im Lieferumfang enthalten

|               |       |       |     |
|---------------|-------|-------|-----|
| Artikelnummer | M.500 |       |     |
| Größen        | S     | M     | L   |
| Schuhgröße    | 35/39 | 39/44 | >44 |
| Farbe         | grau  |       |     |

beidseitig anwendbar

**OPTION:** **M.501** Fersenkeile, rechts und links angeben

**M.505** Diabetic Set, beidseitig anwendbar

**M.500/P** Pumpe im Lieferumfang enthalten



## airstep walker short



Notfallprodukt

Unterschenkel-Fußorthese  
zur Immobilisierung, kurz

HMV-Nr.: **23.06.01.0067**

HMV-Nr.: **23.06.01.1018** mit Keilen

### INDIKATIONEN

- Weichteilverletzungen
- Mittelschwere bis schwere Knöchelverstauchungen
- Verletzungen und Schmerzen an Vorfuß, Fuß und Ferse
- Stabile Fuß- und/oder Knöchelfrakturen
- Postoperativ

### KONTRAINDIKATIONEN

- Die Anwendung dieser Orthese wird nur empfohlen, wenn dokumentiert ist, dass die Fraktur stabil ist und akzeptable Grenzen in Bezug auf Achs- und Drehfehlstellung nicht überschritten werden

### EIGENSCHAFTEN

- Verstärkungsschalen vorne und hinten für eine bessere Stabilität
- Aufblasbares Luftpolster für optimalen Tragekomfort und einen besseren Halt
- Grundkörper aus leichtem, widerstandsfähigem Kunststoff



#### OPTION:

##### M.501

Fersenkeile,  
rechts und  
links angeben

Hilfsmittelnummer:

**23.06.01.1018**



#### OPTION:

##### M.505

Diabetic Set,  
beidseitig  
anwendbar



#### M.500/P

Pumpe im  
Lieferumfang  
enthalten

#### Artikelnummer

#### M.510

#### Größen

#### Schuhgröße

#### Höhe cm

#### Farbe

#### S

35/39

28

grau

#### M

39/44

28

#### L

>44

28

beidseitig anwendbar

**OPTION:** M.501 Fersenkeile, rechts und links angeben

M.505 Diabetic Set, beidseitig anwendbar

M.500/P Pumpe im Lieferumfang enthalten



## airstep tight walker

### Unterschenkel-Fußorthese zur Immobilisierung

HMV-Nr.: 23.06.01.0066

HMV-Nr.: 23.06.01.1018 mit Keilen

#### INDIKATIONEN

- Konservative und postoperative Behandlung von Fuß-/Knöchel- und Beinbruch
- Schwere Knöcheldistorsion Grad I bis III
- Konservative Behandlung nach Riss der Achillessehne
- Postoperative Behandlung nach Tenorrhaphie der Achillessehne
- Prä- und postoperative/posttraumatische Immobilisierung

#### KONTRAINDIKATIONEN

- Die Anwendung dieser Orthese wird nur empfohlen, wenn dokumentiert ist, dass die Fraktur stabil ist und akzeptable Grenzen in Bezug auf Achs- und Drehfehlstellung nicht überschritten werden

#### EIGENSCHAFTEN

- Verstärkungsschalen vorne und hinten für eine bessere Stabilität
- Aufblasbares Luftpolster für optimalen Tragekomfort und einen besseren Halt
- Grundkörper aus leichtem, widerstandsfähigem Kunststoff; Endteil aus gummiartigem Material
- Optionale Polster zur zusätzlichen Anpassung an das Bein
- Integrierte Pumpe zum Aufblasen/Entleeren der Polsterung
- Sohle aus rutschfestem Material



#### OPTION:

**M.501**

Fersenkeile, rechts und links angeben

**Hilfsmittelnummer:**

**23.06.01.1018**



#### OPTION:

**M.505**

Diabetic Set, beidseitig anwendbar

Artikelnummer

**M.550N**

Größen

**S**

**M**

**L**

**XL**

Schuhgröße

35/39

39/44

44/47

>47

Farbe

grau

beidseitig anwendbar

**OPTION:** **M.501** Fersenkeile, rechts und links angeben

**M.505** Diabetic Set, beidseitig anwendbar



## airstep tight walker short

Unterschenkel-Fußorthese zur Immobilisierung, kurz

HMV-Nr.: 23.06.01.0067

HMV-Nr.: 23.06.01.1018 mit Keilen



**OPTION:**

**M.501**

Fersenkeile, rechts und links angeben

**Hilfsmittelnummer:**  
23.06.01.1018



**OPTION:**

**M.505**

Diabetic Set, beidseitig anwendbar

### INDIKATIONEN

- Konservative und postoperative Behandlung von Fuß-/Knöchel- und Beinbruch
- Postoperative Immobilisierung nach chirurgischer Behandlung von Fuß-/Knöchelbruch bei Patienten mit kurzen Gliedmaßen
- Schwere Knöcheldistorsion Grad I bis III
- Konservative Behandlung nach Riss der Achillessehne
- Postoperative Behandlung nach Tenorrhaphie der Achillessehne
- Prä- und postoperative/posttraumatische Immobilisierung

### KONTRAINDIKATIONEN

- Die Anwendung dieser Orthese wird nur empfohlen, wenn dokumentiert ist, dass die Fraktur stabil ist und akzeptable Grenzen in Bezug auf Achs- und Drehfehlstellung nicht überschritten werden

### EIGENSCHAFTEN

- Verstärkungsschalen vorne und hinten für eine bessere Stabilität
- Aufblasbares Luftpolster für optimalen Tragekomfort und einen besseren Halt
- Grundkörper aus leichtem, widerstandsfähigem Kunststoff; Endteil aus gummiartigem Material
- Optionale Polster zur zusätzlichen Anpassung an das Bein
- Integrierte Pumpe zum Aufblasen/Entleeren der Polsterung
- Sohle aus rutschfestem Material

|               |        |       |       |     |
|---------------|--------|-------|-------|-----|
| Artikelnummer | M.560N |       |       |     |
| Größen        | S      | M     | L     | XL  |
| Schuhgröße    | 35/39  | 39/44 | 44/47 | >47 |
| Farbe         | grau   |       |       |     |

beidseitig anwendbar

**OPTION:** M.501 Fersenkeile, rechts und links angeben  
M.505 Diabetic Set, beidseitig anwendbar



## R.O.M. Walker

**Unterschenkel-Fußorthese zur Immobilisierung in definierten, einstellbaren Positionen**

HMV-Nr.: **23.06.01.1011**

### INDIKATIONEN

- Konservative Behandlung von Knöchelfrakturen
- Distorsionstraumata des Sprunggelenks III. Grades
- Postoperative Rehabilitation von Knöchelfrakturen, Stabilisierung von Bänderverletzungen des Sprunggelenks, der Achillessehne
- Mobilisierung bei verzögerter Konsolidierung von Tibiafrakturen
- Charcot-Fuß

### KONTRAINDIKATIONEN

- Die Anwendung dieser Orthese wird nur empfohlen, wenn dokumentiert ist, dass die Fraktur stabil ist und akzeptable Grenzen in Bezug auf Achs- und Drehfehlstellung nicht überschritten werden

### EIGENSCHAFTEN

- Grundkörper aus widerstandsfähigem, leichtem Kunststoff
- Innenpolster der Sohle aus leichtem, wärmeisolierendem Evazote®
- Senkrechte Gelenkschienen mit Klettverschluss zur Befestigung am Polster
- Rutschfeste Gummisohle
- Fußüberzug aus weichem, doppelt gefüttertem Schaumstoff mit Nylongaze- Beschichtung für den Klettverschluss

Artikelnummer

**M.600**

Größen

**S**

**M**

**L**

Schuhgröße

36/39

39/44

44/47

Plantarflexion

0° - 7,5° - 15° - 22,5° - 30° - 37,5° - 45°

Dorsalflexion


0° - 7,5° - 15° - 22,5° - 30° - 37,5° - 45°

Farbe

schwarz

beidseitig anwendbar



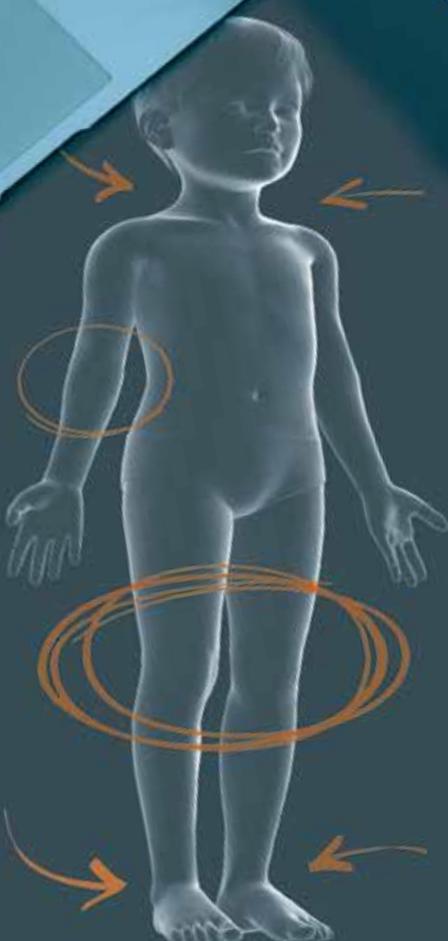

ORTHO 14





# ORTHO14-100

## HWS-Stabilisierungsorthese

HMV-Nr.: 23.12.03.0040

### INDIKATIONEN

- Distorsion der HWS (Schleudertrauma)
- Nackensteife
- Schwindelanfälle zervikalen Ursprungs

### EIGENSCHAFTEN

- Halbstarre Struktur aus Schaumstoff
- Überzug aus Baumwoll-Jersey
- Klettverschluss an der Rückseite
- Transparent im Röntgenbild



|               |           |
|---------------|-----------|
| Artikelnummer | M.OFT100  |
| Größen        | universal |
| Höhe cm       | 6,5       |
| Umfang cm     | 20/30     |
| Farbe         | beige     |



# ORTHO14-105

## HWS-Stabilisierungsschlinge mit Brustbeinauflage

HMV-Nr.: 23.12.03.2020

### INDIKATIONEN

- Mittelschwere bis schwere Distorsionen der Halswirbelsäule (Schleudertrauma)
- Multiple Zervikaldiskopathie
- HWS-Traumata
- Pathologische Dislokation durch Metastasen im Zervikalbereich
- Unterstützung des postoperativen Verlaufs in der Wirbelsäulen Chirurgie

### EIGENSCHAFTEN

- Struktur aus nicht-toxischem PLASTAZOTE®
- 2-Schalen Grundkörper mit Klettverschluss
- Zentrale starre Stützplatten für Kinn und Hinterkopf
- Perfekte Anpassung an die Anatomie von Kinn, Hinterkopf und Schulter
- Röntgendurchlässig
- Trachea-Aussparung



|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| Artikelnummer | M.OFT105I        | M.OFT105P        |
| Größen        | Kinder 0-3 Jahre | Kinder 4-9 Jahre |
| Farbe         | beige            |                  |



# ORTHO14-305

**Schultergelenkorthese zur  
Immobilisierung in definierter Position**

HMV-Nr.: 23.09.01.0094

## INDIKATIONEN

- Einfache Oberarmfrakturen
- Glenohumeralluxation
- Schulterdistorsionen
- Postoperative Behandlung von Humerusfrakturen und Eingriffen bei Glenohumeralluxation
- Postoperative Versorgung bei Sehennaht des langen Kopfes des Bizepsmuskels

## EIGENSCHAFTEN

- Armstütze aus Baumwollmischgewebe
- Immobilisierungsgurt aus weichem, gepolstertem Gewebe
- Schultergurte mit Klettverschluss
- Ellenbogentasche



|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Artikelnummer</b>              | <b>M.OFT305</b>  |
| <b>Größen</b>                     | <b>universal</b> |
| <b>Länge der Tasche<br/>in cm</b> | 23 cm            |
| <b>Höhe</b>                       | 22 cm            |
| <b>Farbe</b>                      | schwarz          |

beidseitig anwendbar



# ORTHO14-310

**Schultergelenkorthese zur  
Immobilisierung in definierter Position**

HMV-Nr.: **23.09.01.0093**

## INDIKATIONEN

- Halter für den Unterarm
- Als Halterung bei eingegipstem Arm
- Zur Entlastung des Acromionclaviculargelenks (nach Subluxation 1. Grades) oder des Glenohumeralgelenks
- Zur Immobilisierung des Oberarms bei gebeugtem Ellenbogen

## EIGENSCHAFTEN

- Armhalter aus Baumwoll-Mischgewebe
- Klettverschluss
- Schulter Schlaufe mit Polster für den Hals



|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Artikelnummer</b>              | <b>M.OFT310</b>  |
| <b>Größen</b>                     | <b>universal</b> |
| <b>Länge der Tasche<br/>in cm</b> | 24 cm            |
| <b>Farbe</b>                      | blau             |

beidseitig anwendbar



# ORTH014-315

## Claviculabandage

HMV-Nr.: 05.09.02.0039

### INDIKATIONEN

- Fraktur des Schlüsselbeins
- Subluxation des Acromioclaviculargeleks

### EIGENSCHAFTEN

- Aus Gazegewebe mit Polsterung
- Aufbau nach Art der Achterbandage mit rückseitigem Klettverschluss



Artikelnummer

M.OFT315

Größen

universal

Farbe

weiß

beidseitig anwendbar



# ORTHO14-500

## Handgelenkorthese zur Immobilisierung

HMV-Nr.: 23.07.02.4057

### INDIKATIONEN

- Verstauchung des Handgelenks
- Mehrfacher Bruch von Speiche und Elle im Unterarm
- Tendinitis des Handgelenks
- Nachbehandlung eines Handgelenkbruchs und nach verfrühter Entfernung eines Gipsverbandes

### EIGENSCHAFTEN

- Vorgeformte und formbare Aluminium- Handgelenkschiene (entfernbar)
- Struktur aus doppelt beschichtetem Schaumstoff
- Verstärkungsstäbe am Handrücken
- Verschluss mit Schnallen und Klettbandern



Artikelnummer

M.OFT500 rechts oder links angeben

Größen

universal

Länge cm

15,5

Farbe

blau



# ORTH014-502

## Handgelenkorthese mit Daumenfixierung zur Immobilisierung

HMV-Nr.: 23.07.02.2034

### INDIKATIONEN

- Verstauchung des Handgelenks
- Tendinitis des Handgelenks
- Zur Nachbehandlung eines Bruchs und nach verfrühter Entfernung eines Gipsverbands
- Verletzung im Ellenbereich des Metakarpal-Phalanx-Gelenks des Daumens

### EIGENSCHAFTEN

- Vorgeformte und formbare Aluminium- Daumenschiene und Aluminium- Handgelenkschiene (entfernbar)
- Doppelt bezogenes Schaumpolster
- Verstärkungsschienen des Handrückens aus Kunststoff
- Verschluss mit Umlenkschlaufe und Klettbindern



|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Artikelnummer | M.OFT502 rechts oder links angeben |
| Größen        | universal                          |
| Länge cm      | 16                                 |
| Farbe         | blau                               |



# ORTHO14-700/2-/3

## Knieorthese zur Immobilisierung, gerade

HMV-Nr.: **23.04.01.0058**

### INDIKATIONEN

- Ruhigstellung des Knies in Extension (postchirurgisch oder posttraumatisch)

### EIGENSCHAFTEN

- Aus zweilagigem, weichem Schaumstoff
- Innen gefüttert mit Frottee
- Außen- und innenseitige, sowie hintere stabile, aber formbare Leichtmetallschienen
- Innen- und außenseitige verstellbare Stützplatten
- Patellaöffnung



| Artikelnummer            | M.OFT700/2 | M.OFT700/3 |
|--------------------------|------------|------------|
| Ruhigstellung bei        | 0°         | 0°         |
| Länge in cm              | 20         | 30         |
| Oberschenkelumfang<br>cm | 24/35      | 33/45      |
| Farbe                    | blau       |            |

beidseitig anwendbar



# ORTHO14-800

**Sprunggelenkorthese zur  
Stabilisierung in einer Ebene**

HMV-Nr.: **23.02.02.0078**

## INDIKATIONEN

- Distorsionstraumata II. und III. Grades
- Funktionale Genesungsphase nach chirurgischem Eingriff
- Funktionale Genesung nach Knöchelbrüchen
- Chronische Instabilität TT und sportliche Aktivität

## EIGENSCHAFTEN

- Doppelt bezogenes Schaumpolster
- Zweischalige, anatomisch geformte Bandage aus leichtem und strapazierfähigem Material
- Leichte Anpassung an die Breite der Ferse dank der Klettbänder
- Leichtes Anlegen dank der Komplettöffnung



|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Artikelnummer</b> | <b>M.OFT800</b>  |
| <b>Größen</b>        | <b>universal</b> |
| <b>Höhe cm</b>       | 16               |
| <b>Farbe</b>         | schwarz          |

beidseitig anwendbar



# ORTHO14-805

Unterschenkel-Fußorthese zur  
Immobilisierung in vorgegebener  
Position

HMV-Nr.: 23.06.01.0076

## INDIKATIONEN

- Konservative Behandlung von Knöchelfrakturen
- Distorsionen III. Grades
- Stabile Fuß-, Knöchel-, Tibia- und Fibulafrakturen distal

## EIGENSCHAFTEN

- Struktur aus widerstandsfähigem, leichtem Kunststoff
- Sohle aus rutschfestem Gummi
- Sohlenpolster innen aus hautfreundlichem Evazote®
- Seitenstangen mit Velcro® Klettband für die Haftung am Polster
- Laschen mit Velcro® - Klettverschluss



|               |          |       |       |
|---------------|----------|-------|-------|
| Artikelnummer | M.OFT805 |       |       |
| Größen        | M        | L     | XL    |
| Schuhgröße    | 23/25    | 26/28 | 29/31 |
| Höhe cm       | 22       | 25    | 27    |
| Farbe         | schwarz  |       |       |

beidseitig anwendbar



# ORTHO14-810

## Peroneusorthese

HMV-Nr.: 23.03.02.5026

### INDIKATIONEN

- Peroneuslähmung
- Leichter bis schwerer spastischer Equinismus

### EIGENSCHAFTEN

- Struktur aus Polypropylen
- Warm verformbar
- Gurt mit Klettverschluss am Wadenansatz



#### Artikelnummer

#### Größen

#### Wadenumfang cm

#### Fußquerschnitt cm

#### Höhe der Orthese cm

#### Farbe

#### M.OFT810 rechts oder links

| 1.    | 2.    | 3.    | 4.    | 5.    |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 15/19 | 19/23 | 22/24 | 23/27 | 25/29 |
| 10    | 11    | 12    | 13    | 15    |
| 16    | 19    | 23    | 25    | 28    |

semitransparent

## ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GMBH

### 1. Allgemeines

- 1.1 Diese allgemeinen Verkaufsbedingungen (im Folgenden: AGB) gelten für alle unsere (Orthoservice Deutschland GmbH) Lieferungen und Leistungen gegenüber Unternehmern im Sinne des § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichem Sondervermögen (nachfolgend „Kunde“).
- 1.2 Sie gelten auch für unsere zukünftigen Lieferungen und Leistungen einschließlich etwaiger Ersatzlieferungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.
- 1.3 Nimmt der Kunde die Leistung/Lieferung durch uns vorbehaltlos an, liegt auch darin das Anerkennung unserer AGB durch den Kunden.
- 1.4 Abweichende und/oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nicht. Diesen widersprechen wir hiermit. Sie gelten nur, wenn und soweit wir uns ausdrücklich mit ihnen oder mit Teilen davon einverstanden erklärt haben.
- 1.5 Auch in der vorbehaltlosen Lieferung und/oder Erbringung der Leistung durch uns liegt kein Anerkennung von den diesen AGB abweichenden oder diese ergänzenden AGB des Kunden.

### 2. Angebot und Vertragsschluss

- 2.1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer ausdrücklichen Bestätigung. Das gleiche gilt für Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden. Alle Angaben über Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn und soweit wir sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnen.
- 2.2 Die zu dem Angebot gehörigen Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie durch uns nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.
- 2.3 An Kostenvorschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns sämtliche Eigentumsrechte und urheberrechtliche Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Diese Unterlagen dürfen ohne unsere ausdrückliche und vorherige Zustimmung Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Diese Unterlagen sind uns zurückzugeben, wenn der Auftrag nicht erteilt wird. Etwaige Kopien der Unterlagen sind in diesem Fall zu vernichten.

### 3. Preise, Zoll, Steuern

- 3.1 Fehlt es an einer ausdrücklichen, abweichenden Vereinbarung, gelten die in unserem Angebot (oder – mangels eines ausdrücklichen Angebotes unsererseits – die in unseren am Lieferstage aktuellen Preislisten) angegebenen Preise zusätzlich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer.
- 3.2 Die Preise verstehen sich, falls nicht ausdrücklich anders vereinbart, ab Werk (Incoterms 2010: EXW), ausschließliche Versand, Transportversicherung und Verpackung.
- 3.3 Sämtliche bei einer Lieferung außerhalb Deutschlands anfallenden Steuern, Zölle, Abgaben, etc. trägt der Kunde.

### 4. Versand, Lieferung

- 4.1 Für unsere Lieferungen ist unser Sitz Erfüllungsort. Die Versendung erfolgt auf Gefahr des Kunden. Die Versandart und der Versandweg werden von uns gewählt. Soweit durch die ausdrückliche Vereinbarung von Kundendwischen Mehrkosten anfallen, gehen sie zu Lasten des Kunden.
- 4.2 Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Kunden zumutbar sind.
- 4.3 Liefertermine sind nur dann verbindlich, wenn dies ausdrücklich vereinbart worden ist. Liefertermine sind eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder wir die Versandbereitschaft mitgeteilt haben.
- 4.4 Die Einhaltung vereinbarter Fristen für Lieferungen/Leistungen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher durch den Kunden zu liefernder Unterlagen, erforderlicher Genehmigungen und Freigaben, insbesondere von Plänen sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen (z.B. Anzahlungen) und sonstigen Verpflichtungen durch den Kunden voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die vereinbarten Liefer- und Leistungsfristen angemessen; dies gilt nicht, wenn wir die Verzögerung zu vertreten haben.
- 4.5 Ist die Nichteinhaltung vereinbarter Fristen auf höhere Gewalt, z.B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr oder auf ähnliche Ereignisse, z.B. Streik, Aussperrung etc. zurückzuführen, verlängern sich die vereinbarten Fristen angemessen. Gleiches gilt für den Fall, dass wir selbst nicht rechtzeitig oder ordnungsgemäß beliefert worden sind (bei vereinbarten Lieferterminen gilt demnach: richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung vorbehalten).

### 4.6 Es gilt unsere Versandkostenliste.

### 5. Zahlung, Verzug, Aufrechnung und Zurückbehaltung

- 5.1 Unsere Rechnungen sind ohne Abzüge (kein Skonto) innerhalb der vereinbarten Fristen und ohne eine ausdrückliche Vereinbarung einer Frist sofort nach Rechnungserhalt zur Zahlung fällig.
- 5.2 Bei Zahlungsverzug sowie bei begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Kunden sind wir - unbeschadet unserer sonstigen Rechte - befugt, für noch nicht durchgeführte Lieferungen eine Vorauszahlung zu verlangen und sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung sofort fällig zu stellen. Unsere Lieferpflicht ruht, solange der Kunde mit einer fälligen Zahlung in Verzug ist.
- 5.3 Der Kunde ist zur Zurückbehaltung von Zahlungen nur wegen unrechtmäßiger oder gerichtlich festgestellter Gegenforderungen berechtigt. Der Kunde ist zur Aufrechnung nur mit unrechtmäßigen oder gerichtlich festgestellten Gegenansprüchen berechtigt.
- 5.4 Uns stehen Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte uneingeschränkt im gesetzlichen Umfang zu.

### 6. Rücksendungen

- 6.1 Nicht mangelbedingte Rücksendungen (außerhalb des Gewährleistungsrechtes) gilt: Diese werden nur nach vorheriger Vereinbarung und unter Befügung der originalen Lieferpapiere kostenfrei innerhalb eines Kalendermonats angenommen, wobei die Ware in jedem Falle ausreichend frankiert an uns zurückzusenden ist. Eine Rücknahmeverpflichtung besteht nicht. Nach Ablauf von einem Kalendermonat berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15 €.
  - 6.2 Bei Auswahländerungen muss das nicht passende Produkt im Originalzustand innerhalb von 10 Werktagen auf Kosten des Käufers zu uns geschickt werden. Anderenfalls behalten wir uns das Recht vor, die Bestellung komplett zu berechnen.
- ### 7. Gefahrübergang, Mängelrüge
- 7.1 Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferteile (oder der Übergabe an den Kunden zur Verladung auf Fahrzeuge des Kunden bei Selbstabholung) auf den Kunden über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir im Einzelfall noch andere Leistungen, zum Beispiel die Versendungskosten oder Anfuhr und Aufstellung übernommen haben.
  - 7.2 Verzögert sich der Versand auf Wunsch des Kunden oder infolge von Umständen, die der Kunde zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Anzeige der Versandbereitschaft durch uns auf den Kunden über.
  - 7.3 Der Kunde darf die Entgegennahme von Lieferungen und die Abnahme von Leistungen wegen unerheblicher Mängel nicht verweigern (die Gewährleistungsansprüche des Kunden gemäß Ziffer 7 bleiben unberührt).
  - 7.4 Die gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§ 377 HGB) bestehen unbeschränkt. Unterlässt der Kunde die nach § 377 HGB unverzügliche Untersuchung der Ware oder die unverzügliche Anzeige eines Mangels, gilt die Ware als genehmigt und der Kunde kann keine Rechte wegen des Mangels oder einer Zuwenig-Lieferung mehr geltend machen. Verhandeln wir mit dem Kunden über eine von diesem erhobene Rüge, liegt darin ohne ausdrücklichen Hinweis kein stillschweigender Verzicht auf den Einwand der Verspätung der Untersuchung der Ware bzw. der Rüge des Mangels. Gleiches gilt für eine durch uns eventuell erklärte Bereitschaft zur Nachbesserung des Mangels (oder bei einer tatsächlich erfolgten Nachbesserung). Mängelrügen haben schriftlich zu erfolgen.

### 8. Eigentumsvorbehalt

- 8.1 Wir behalten uns das Eigentum an allen gelieferten Liefergegenständen (im Folgenden: Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund einschließlich der künftig entstehenden oder bedingten Forderungen aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen vor. Dies gilt auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden.
- 8.2 Bestehen Anhaltspunkte, welche die Annahme der Zahlungsunfähigkeit des Kunden oder das Drohen einer solchen rechtfertigen, sind wir berechtigt, ohne Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten und Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen.
- 8.3 Be- und Verarbeitungen der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne des § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Ziffer 8.1. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Kunden steht uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren zu. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Kunde bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware an uns und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Die hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne der Ziffer 8.1.
- 8.4 Der Kunde ist nur im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes und solange er nicht mit der Kaufpreiszahlung im Verzug ist, berechtigt, die Vorbehaltsware weiter zu veräußern, zu verarbeiten oder mit anderen Sachen zu verbinden oder sonst einzubauen. Jede anderweitige Verfügung über die Vorbehaltsware ist unzulässig. Von dritter Seite vorgenommene Pfändungen oder sonstige Zugriffe auf die Vorbehaltsware sind uns unverzüglich anzuzeigen. Alle Interventionskosten gehen zu Lasten des Kunden, soweit sie von dem Dritten nicht eingezogen werden können und die Drittwiderspruchsklage berechtigterweise erhoben worden ist. Stundet der Kunde seinem Abnehmer den Kaufpreis, so hat er sich gegenüber diesem das Eigentum an der Vorbehaltsware zu den gleichen Bedingungen vorzubehalten, wenn den wir uns das Eigentum der Lieferung der Vorbehaltsware vorbehalten haben. Jedoch ist der Kunde nicht verpflichtet, sich auch das Eigentum hinsichtlich der gegenüber seinem Abnehmer erst künftig entstehenden Forderungen vorzubehalten. Anderenfalls ist der Kunde zur Weiterveräußerung nicht ermächtigt.
- 8.5 Die Forderungen des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden hiermit bereits an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Der Kunde ist zu einer Weiterveräußerung nur berechtigt und ermächtigt, wenn sichergestellt ist, dass die ihm daraus zustehenden Forderungen auf uns übergehen.
- 8.6 Wird die Vorbehaltsware von dem Kunden zusammen mit anderen, nicht von uns gelieferten Waren zu einem Gesamtpreis veräußert, so erfolgt die Abtretung der Forderung aus der Veräußerung in Höhe des Rechnungswertes der jeweils veräußerten Vorbehaltsware.

- 8.7 Wird die abgetretene Forderung in eine laufende Rechnung aufgenommen, so tritt der Kunde bereits hiermit einen der Höhe nach dieser Forderung entsprechenden Teil des Saldos einschließlich des Schlussaldos aus dem Kontokorrent an uns ab.
- 8.8 Der Kunde ist bis zum Widerruf durch uns zur Einziehung der abgetretenen Forderung ermächtigt.  
Wir sind zum Widerruf berechtigt, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus der Geschäftsverbindung nicht ordnungsgemäß nachkommt oder Umstände bekannt werden, die geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Kunden erheblich zu mindern. Liegen die Voraussetzungen für die Ausübung des Widerrufsrechts vor, hat der Kunde auf unser Verlangen unverzüglich die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt zu geben, alle zum Einzug der Forderungen erforderlichen Angaben zu machen, uns die dazugehörigen Unterlagen auszuhandigen und dem Schuldner die Abtretung anzuzeigen. Wir sind auch selbst zur Abtretungsanzeige an den Schuldner berechtigt. Zur Abtretung der Forderungen im Übrigen ist der Kunde nicht befugt, auch nicht aufgrund unserer Einziehungsermächtigung.
- 8.9 Übersteigt der Nominalwert (Rechnungsbetrag der Ware oder Nennbetrag der Forderungsrechte) der für uns bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 10 %, sind wir auf Verlangen des Kunden insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach seiner Wahl verpflichtet.
- 8.10 Machen wir den Eigentumsvorbehalt geltend, so gilt dies nur dann als Rücktritt vom Vertrag, wenn dies ausdrücklich durch uns erklärt wird. Das Recht des Kunden, die Vorbehaltsware zu besitzen, erlischt, wenn er seine Verpflichtungen aus diesem oder einem anderen Vertrag nicht erfüllt.
- 8.11 Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren zur Sicherung aller Ansprüche vor, die uns aus der Geschäftsverbindung gegen den Kunden zustehen. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Ware entstehenden neuen Erzeugnisse, wobei wir als Hersteller gelten. Bei einer Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung mit Sachen, die dem Kunden nicht gehören, erwerben wir Miteigentum im Verhältnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zu den Rechnungswerten der anderen Materialien.
- 8.12 Alle Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltswaren tritt der Kunde schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteiles zur Sicherung an uns ab. Solange der Kunde bereit und in der Lage ist, seinen Verpflichtungen uns gegenüber ordnungsgemäß nachzukommen, darf er über die in unserem Eigentum bzw. Miteigentum stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an uns abgetretenen Forderungen selbst einziehen.  
Sicherungsübereignungen, Verpfändungen und Forderungsabtretungen, auch im Wege des Forderungsverkaufes, darf der Kunde nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung vornehmen. Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren und Forderungen sind uns vom Kunden unverzüglich mitzuteilen.  
Übersteigt der Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 %, so werden wir auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben. Die Ausübung des Eigentumsvorbehaltes bedeutet nicht den Rücktritt vom Vertrag.
- 9. Gewährleistung, Verjährung**
- 9.1 Wir übernehmen keine über die gesetzliche Gewährleistung hinausgehende oder neben dieser bestehenden, selbständigen Garantie. Etwas anderes gilt nur, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist.  
Für etwaige Mängel der Lieferung haften wir unter Ausschluss weiterer Ansprüche wie folgt:
- 9.2 Alle gelieferten Teile, die einen Mangel aufweisen, sind nach durch uns ausübendem Wahlrecht unentgeltlich nachzubessern oder neu zu liefern, sofern und soweit dessen Ursache bereits zum Zeitpunkt des Gefahrüberganges vorlag (Nacherfüllung).
- 9.3 Die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten tragen wir. Dies gilt nicht, wenn die Aufwendungen sich erhöhen, weil die Sache nach der Lieferung an einen anderen Ort als den Bestimmungsort der Lieferung verbracht worden ist, es sei denn, das Verbringen entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Sache.
- 9.4 Nimmt der Kunde eine mangelhafte Lieferung an, obwohl er den Mangel kennt, so stehen ihm die Ansprüche und Rechte wegen des Mangels nur zu, wenn er sich diese bei der Annahme vorbehält.
- 9.5 Die in Prospekten, Werbematerialien, Beschreibungen etc. gemachten Darlegungen über Maße, Gewichte, Leistungsfähigkeit, Strombedarf etc. sind ungefähre Angaben und keine Beschaffenheitsangaben. Sie begründen keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie. Wir behalten uns Abweichungen im für den Kunden zumutbaren Umfang vor. Dies gilt auch für Konstruktions- oder Produktionsänderungen.
- 9.6 Ansprüche auf Nacherfüllung verjähren in einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. Entsprechendes gilt für Rücktritt und Minderung sowie Schadensersatz.  
Diese Frist gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke) und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB zwingend längere Fristen vorschreibt und auch nicht bei Vorsatz, arglistigem Verschweigen des Mangels sowie bei Nichterhaltung einer Beschaffenheitsgarantie und nicht bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalspflichten). Dann gelten jeweils die gesetzlichen Verjährungsfristen. Die gesetzlichen Regelungen über Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben unberührt.
- 9.7 Etwaige Rückgriffsansprüche des Kunden gegen uns gemäß § 478 BGB (Rückgriff des Unternehmers) bestehen nur insoweit, als der Kunde mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat.  
Für den Umfang des Rückgriffsanspruchs gegen uns gemäß § 478 Abs. 2 BGB gelten ferner die Ziffern 7.2 bis 7.8, 7.10 und Ziffer 8 (vollständig) dieser AGB entsprechend.
- 9.8 Etwaige Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Sachmangels richten sich nach Ziffer 10.
- 10. Haftungsausschluss, -beschränkung**
- 10.1 Etwaige Schadensersatzansprüche des Kunden – gleich aus welchem Rechtsgrund – sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei arglistigem Verschweigen des Mangels, bei Nichterhaltung einer Beschaffenheitsgarantie, bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und/oder bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder bei der Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf (sogenannte wesentliche Vertragspflichten / Kardinalpflichten). Auch Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sind von dieser Haftungsbeschränkung nicht berührt.  
Diese Haftungsbeschränkung gilt gleichermaßen für Pflichtverletzungen durch unsere Organe und Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen.
- 10.2 Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird.
- 10.3 Die vorstehenden Haftungseinschränkungen gelten gleichermaßen für Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen (§ 284 BGB). Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- 11. Datenschutz**  
Der Kunde ist darauf hingewiesen und gestattet, dass im Rahmen der Auftragsabwicklung und Abrechnung Daten mittels EDV verarbeitet und gespeichert werden.  
Lieferschein und Rechnung gelten gleichzeitig als Benachrichtigung im Sinne des § 33 Abs. 1 des Bundesdatenschutzgesetzes.
- 12. Eignung und Beschaffenheit, Einhaltung von Vorschriften, Schutzrechte, Rechte Dritter**
- 12.1 Alle Angaben und Auskünfte durch uns über die Beschaffenheit, Eignung und Anwendbarkeit der Waren befreien den Kunden nicht von der Durchführung eigener Prüfungen und eigener Versuche.
- 12.2 Der Kunde ist für die Beachtung etwaiger gesetzlicher, behördlicher und anderer Vorschriften bei der Anwendung der bei uns erworbenen Ware in dem Bestimmungs- und Nutzungsgebiet selbst verantwortlich.
- 12.3 Wir sichern nicht zu, dass die gelieferten Produkte außerhalb Deutschlands nicht gegen (insbesondere Schutz-) Rechte Dritter verstoßen. Dies ist durch den Kunden jeweils selbst zu überprüfen. Für Lieferungen innerhalb Deutschlands sichern wir zu, dass uns nicht bekannt ist, dass Rechte Dritter der Nutzung der Gegenstände entgegenstehen.
- 12.4 Werden bei der Herstellung von uns im Auftrag des Kunden dessen Muster, Zeichnungen oder sonstige Angaben verwendet, sichert der Kunde uns damit zu, dass dadurch keine Rechte Dritter verletzt werden. Der Kunde stellt uns von sämtlichen Ansprüchen Dritter wegen etwaiger sich aus der Verwendung der Muster, Zeichnungen oder sonstigen Angaben eventuell ergebender Rechtsverletzungen frei.
- 12.5 An allen Produkten, Entwürfen, Zeichnungen, Anleitungen und Marken behält sich die Orthoservice Deutschland GmbH das Eigentums- und Urheberrecht vor.
- 13. Anwendbares Recht, Gerichtsstand**
- 13.1 Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamte Geschäftsverbindung mit dem Kunden und alle sich daraus ergebenden Ansprüche gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes und der Kollisionsnormen des internationalen Privatrechtes, insbesondere der ROM-I-Verordnung.
- 13.2 Erfüllungsort für alle unsere Lieferungen und Leistungen und für die Zahlung des Kunden ist Baden-Baden.
- 13.3 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus der Geschäftsverbindung ist Baden-Baden.
- 13.4 Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine vertragliche Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen und Vereinbarungen nicht berührt.

Stand: Juli 2024





# ORTHOSERVICE RO+TEN

Take care feel better



www.orthoservice.de



UNO DEI MIGLIORI CERTIFICATI  
DEL MONDO PER IL 2015

90CC10029DE006.0724

**Headquarter: ORTHOSERVICE AG**  
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. +48 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



**ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH**  
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

**ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.**  
ul. Warszawska 41 6a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

**OSUK Ltd**  
Units 47&50 North East BIC  
Wearfield  
Sunderland Enterprise Park East  
Sunderland SR5 2TA  
Tel +44 (0) 191 51 66 220  
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

**RO+TEN S.r.l.**  
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 0362 18 51 200 · Fax 0039 0362 18 58 065  
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Copyright Orthoservice Deutschland GmbH Juli 2024

Die in diesem Dokument vorhandenen Beschreibungen und Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und zu kommerziellen Zwecken. Orthoservice behält sich das Recht vor, Änderungen entsprechend den eigenen Anforderungen vorzunehmen.



**Bestellung bei:  
ORTHOSERVICE  
DEUTSCHLAND GMBH**  
Flugstraße 8  
D-76532 Baden-Baden  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11  
Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de  
www.orthoservice.de

